

# Agilent Cary UV Workstation

## Software Registration Instructions

## 软件注册说明

Select [English](#) or [Chinese](#) instructions. 选择[英语](#)或[中文](#)说明。

### Introduction

SubscribeNet allows users to manage software entitlements, order media or download software and we recommend users renew subscriptions annually to have full access to the newest updates.

After installation of Cary UV Workstation, you will have 60 days to complete software registration as described in these instructions. To connect to an instrument after the 60-day period, you must register your software.

#### You will need the following:

- Activation code(s) – found in the lavender envelope(s) shipped with the software
- An internet connection to register your software
  - Is your instrument computer not connected to the internet? Perform Steps 4-19 on another computer that can access the internet.
  - USB drive – copy the license file generated at the end of Step 19 onto the USB and then onto the computer the Cary UV Workstation software is installed on
- SubscribeNet login credentials if your company has a pre-existing account
  - If you aren't sure, first check with your IT department or email [subscribenet\\_support@agilent.com](mailto:subscribenet_support@agilent.com)

### Registration

The main steps to register your software are:


- 1 Get the computer name and MAC address for the computer the Cary UV Workstation software was installed on from the OpenLab Control Panel application.
- 2 Create a SubscribeNet account or login with existing SubscribeNet username and password.
- 3 Enter any additional activation codes, if required.
- 4 Create the License file.

5 Import the License file into OpenLab Control Panel.

To find the computer name and MAC address:



- 1 Double-click the OpenLab **Control Panel** icon on the computer desktop or click the Windows **Start** button > **Agilent Technologies** > **Control Panel**.
- 2 Click **Licenses** from the **Administration** tab.

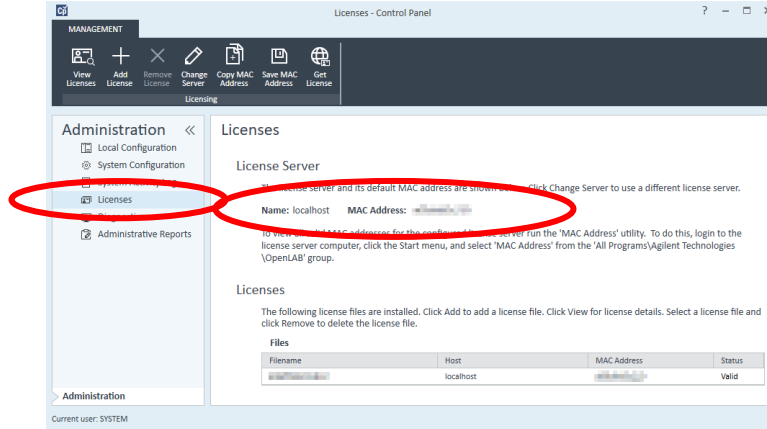

3 Take note of the server **name** and the **MAC Address**. You will need them in Step 15.

To create a **SubscribeNet** account or login with existing **SubscribeNet** credentials:

4 Press CTRL on your keyboard and then click <https://agilent.subscribe.net.com>.

**NOTE**

If your computer is not connected to the internet, print these instructions out and take them, and the USB, to a computer that will be used to continue your software registration.

5 If you already have a **SubscribeNet** login and password from previously registered software, enter in that information, click **Login** and then skip to **Step 11**. Otherwise, go to **Step 6**.

**NOTE**

If you are generating additional **Academic Licenses** from an already registered **Academic License** activation code skip to **Step 14**.

6 Click '**CLICK HERE**' to create a Login ID for a new account.

**Electronic Software and License Delivery**

Please login. Your Login ID is your Email address.

**Login ID**

**Password**

Remember my password until I logout

Login

If you have forgotten your login ID, password, or are not sure whether you have an account use our [Password Finder](#).

**SubscribeNet new account registration.**

Customers who have an authorization code from their Agilent product purchase may [CLICK HERE](#) to register and create a new **SubscribeNet** Account and Login ID.

7 Enter in the required details. The **Authorization Code(s)** are printed on stickers in the lavender envelope(s) provided in the software box.

**Electronic Software and License Delivery**

**Registration Information**

Registration information is used to create a new SubscribeNet Account and Login ID (email address) for the Account. An authorization code you received from your product purchase is required.

**Important Email Notes**

- Please ensure the email address is entered correctly or you will not receive a welcome email with your Login ID and Password.
- If the email entered has already been used for an account Login ID, you will not receive a welcome email. The new account will display as an additional selection after you log in to SubscribeNet.

\* Indicates a required field.

Authorization Code\*

Email\*

Re-enter Email to Verify\*

Company\*

Department\*

First Name\*

Last Name\*

Job Title

Phone\*

Address 1\*

Address 2

Address 3

City\*

State/Province\*

Postal Code

Country\*

- 8 Press **Submit**. You will receive an email with your username and password. If you do not receive an email within 15 minutes first check your email Spam or Junk folder. Otherwise, contact [subscribenet\\_support@agilent.com](mailto:subscribenet_support@agilent.com).
- 9 Open the email and click the SubscribeNet link. Enter your Login ID (the email address you registered with) and password and log in.
- 10 Follow the prompts to change the password.

To enter any additional activation codes, if required:

**NOTE**

When registering Academic License authorization codes, perform the following steps in the registration process once on *each* computer the Cary UV Workstation software is installed on. You can use the same SubscribeNet credentials for each registration, but the MAC address found in Step 2 and the license file generated in Step 14 must be specific to each computer.

- 11 If you used an existing username and password to log into SubscribeNet, click **Register Authorization Code**. Otherwise, go to Step 14.

Agilent Technologies | Our measure is your success. | Helping our customers achieve better results, faster than ever.

Your Login is: \_\_\_\_\_ Account: \_\_\_\_\_

**Electronic Software and License Delivery**

**Register Authorization Code**

Authorization Codes represent license or subscription products that can be added to your Account Lic using this page.


You may enter up to ten Authorization Codes, separated by semicolons.

Please enter an Authorization Code:


- 12 Enter in the Authorization Code included in the lavender envelope provided in the Cary UV Workstation software box.
- 13 Press **Submit**.

To create the license file:

- 14 Click **Generate or View Licenses**.

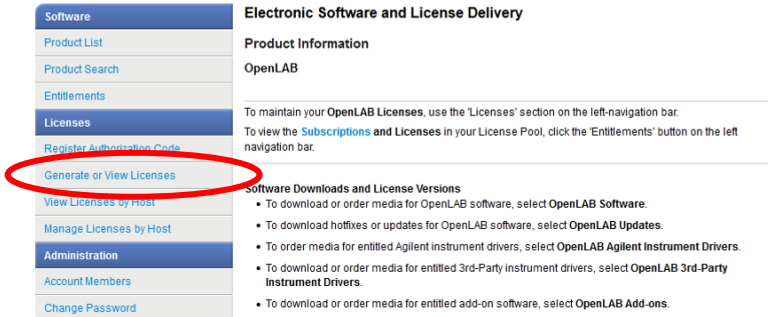

15 Select the tick box of the license to generate. Click **Generate**.

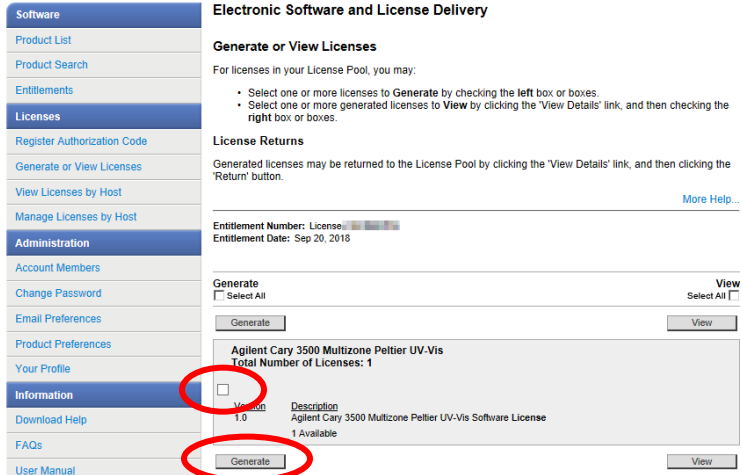


16 On the SubscribeNet window, enter the MAC Address and Name you noted in Step 3. Enter the **MAC Address** into the **HostID** field and the **Name** into the **Hostname** field. Enter a Description of your computer.

17 Leave the 'Number of Licenses to Generate' box set as the default value of 1.


**NOTE**

When registering Academic License authorization codes, enter 1 in the 'Number of Licenses to Generate' box.

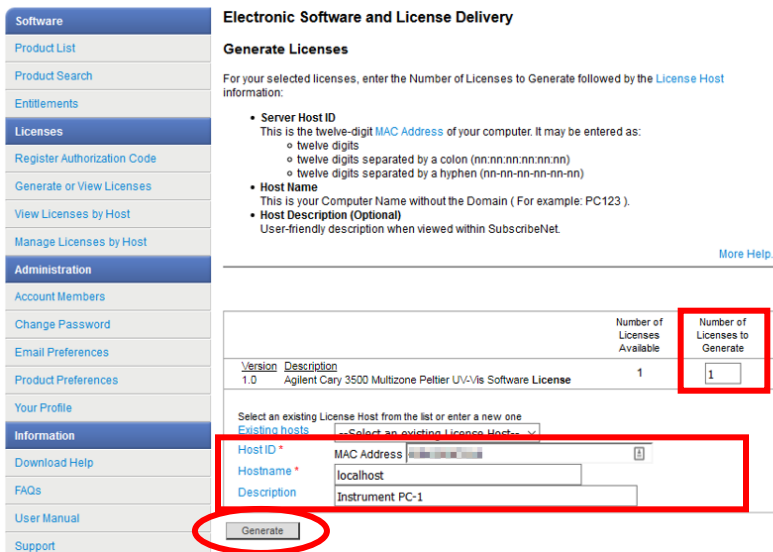

18 Click **Generate** to generate the license file.

- Click **Download License File**. A dialog box may appear. Follow the prompts to save the file or note where the file was automatically saved to, typically in your C:\Users\Username\Downloads folder.

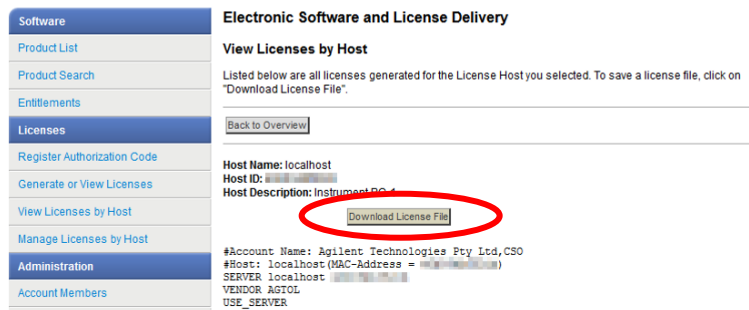


**NOTE**


If you are performing this registration on a computer other than the one the Cary UV Workstation software was installed on, navigate to the saved license file and then save it to a USB drive. Insert the USB drive into the computer that the Cary UV Workstation software is installed on before proceeding.

**To import the License file into OpenLab Control Panel:**

- In the OpenLab Control Panel, click **Add License**.

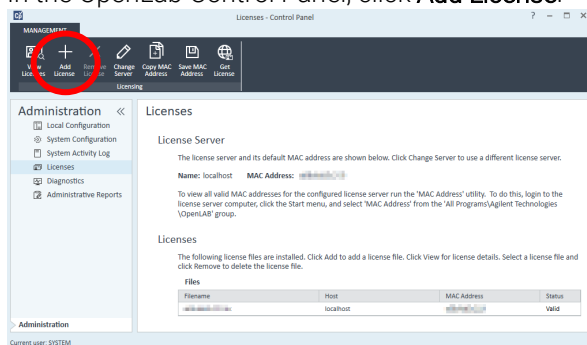

- Click **Select a license file** and then click **Browse**.

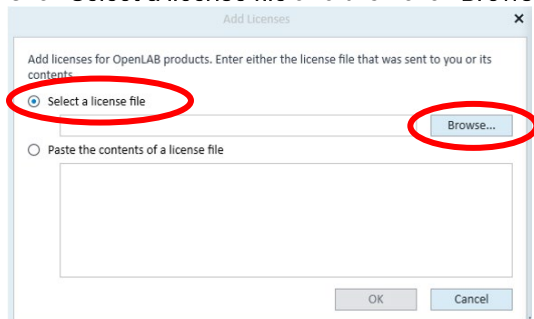

- Navigate to and then select your previously saved license file on the computer or USB. Click **Open**.
- Select **OK** to Add your license.
- Your license will now appear in the list of Licenses in the OpenLab Control Panel and in SubscribeNet when you click 'Generate or View Licenses'.
- Restart the computer to complete the process.

**NOTE**

When registering Academic License authorization codes, repeat Steps 2-5 and then Steps 14-25 on each computer the Cary UV Workstation software is installed on. You will need to log in to SubscribeNet using the same credentials as the first registration before continuing with Step 14.

## 简介

借助 SubscribeNet，用户可以管理软件授权、订购介质或下载软件，我们建议用户每年进行续订，以获得所有的最新更新。

安装 Cary UV Workstation 后，您将有 60 天的时间按照以下说明所述完成软件注册。如希望在 60 天期限结束后连接到仪器，您必须注册软件。

### 所需项目：

- 激活码 – 位于软件附带的淡紫色信封内
- 用于注册软件的 Internet 连接
  - 您的仪器计算机未连接到 Internet? 请在另一台可以访问 Internet 的计算机上执行步骤 4-19。
  - USB 驱动器 – 将步骤 19 结束时生成的许可证文件复制到 USB，然后再复制到安装 Cary UV Workstation 软件的计算机上
- SubscribeNet 登录凭据（若贵公司已有帐户）
  - 如果您不能确定，请先咨询您的 IT 部，或发送电子邮件至 [subscribenet\\_support@agilent.com](mailto:subscribenet_support@agilent.com)


## 注册

注册软件的主要步骤如下：

- 1 从“OpenLab 控制面板”应用程序获得安装 Cary UV Workstation 软件的计算机的计算机名称和 MAC 地址。
- 2 创建 SubscribeNet 帐户，或使用现有 SubscribeNet 用户名和密码登录。
- 3 必要时，输入附加激活码。
- 4 创建许可证文件。
- 5 将许可证文件导入“OpenLab 控制面板”。

要查找计算机名称和 MAC 地址：

- 1 双击计算机桌面上的 OpenLab 控制面板图标，或单击 Windows 开始按钮 > Agilent Technologies > 控制面板。
- 2 单击管理选项卡中的许可证。

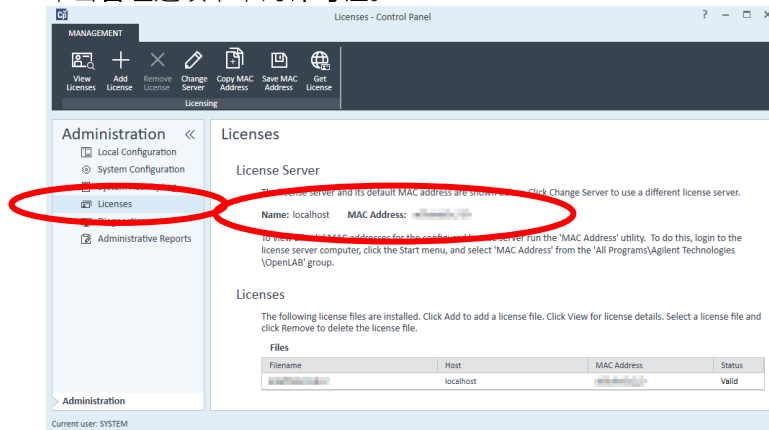

- 3 记下服务器名称和 MAC 地址。在执行步骤 15 时，需要使用这些信息。

要创建 SubscribeNet 帐户，或使用现有 SubscribeNet 凭据登录：

- 4 按下键盘上的 CTRL，然后单击 <https://agilent.subscribenet.com>。

**注意**

如果您的计算机未连接到 Internet，请将这些说明打印出来，然后带着说明文档和 USB 前往可继续注册软件的计算机处。

- 5 如果您以前注册软件时已获得 SubscribeNet 登录名和密码，请输入该信息，单击**登录**，然后跳至**步骤 11**。否则，请转至**步骤 6**。

**注意**

如果您要通过已注册的学术许可证激活码生成额外的学术许可证，请跳至**步骤 14**。

- 6 单击“**单击此处**”为新帐户创建“登录 ID”。

**Electronic Software and License Delivery**

Please login. Your Login ID is your Email address.

Login ID

Password

Remember my password until I logout

Login

If you have forgotten your login ID, password, or are not sure whether you have an account use our [Password Finder](#).

**SubscribeNet new account registration.**

Customers who have an authorization code from their Agilent product purchase may [CLICK HERE](#) to register and create a new SubscribeNet Account and Login ID .

- 7 输入所需详情。“授权代码”打印在软件包装盒中提供的淡紫色信封内的贴纸上。

**Electronic Software and License Delivery**

**Registration Information**

Registration information is used to create a new SubscribeNet Account and Login ID (email address) for the Account. An authorization code you received from your product purchase is required.

**Important Email Notes**

- Please ensure the email address is entered correctly or you will not receive a welcome email with your Login ID and Password.
- If the email entered has already been used for an account Login ID, you will not receive a welcome email. The new account will display as an additional selection after you log in to SubscribeNet.

\* Indicates a required field.

Authorization Code\*

Email\*

Re-enter Email to Verify\*

Company\*

Department\*

First Name\*

Last Name\*

Job Title

Phone\*

Address 1\*

Address 2

Address 3

City\*

State/Province\*

Postal Code

Country\*

- 8 按下**提交**。您将收到一封包含您的用户名和密码的电子邮件。如果您未在 15 分钟内收到电子邮件，请先检查您的电子邮箱中的“垃圾邮件”文件夹。如果该文件夹中没有电子邮件，请联系 [subscribenet\\_support@agilent.com](mailto:subscribenet_support@agilent.com)。

- 9 打开电子邮件并单击 SubscribeNet 链接。输入您的“登录 ID”（您注册时使用的电子邮件地址）和密码并登录。


- 10 按照提示操作以更改密码。

如需要输入附加激活码：

注意

注册学术许可证授权代码时，请在每台安装 Cary UV Workstation 软件的计算机上于注册过程中执行以下步骤。您可以针对每个注册使用相同的 SubscribeNet 凭据，但步骤 2 中找到的 MAC 地址和步骤 14 中生成的许可证文件必须是每台计算机所特有的。

- 11 如果您使用了现有用户名和密码登录 SubscribeNet，请单击**注册授权代码**。否则，请转至步骤 14。

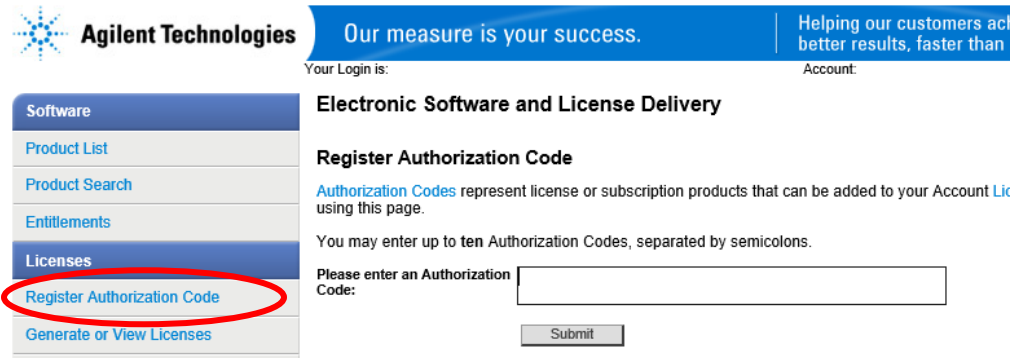


- 12 输入 Cary UV Workstation 软件包装盒中提供的淡紫色信封内包含的“授权代码”。


- 13 按下**提交**。

要创建许可证文件：

- 14 单击**生成或查看许可证**。

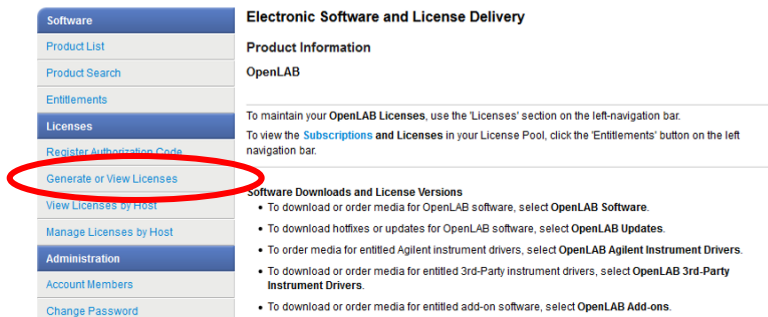

- 15 选中要生成的许可证的复选框。单击**生成**。

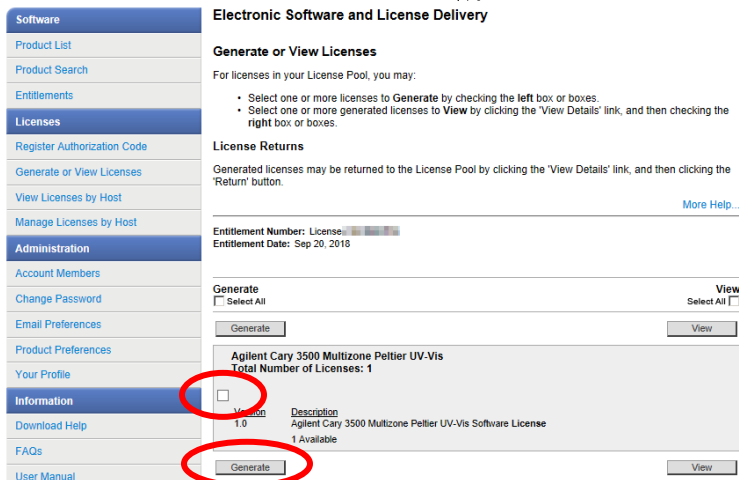





- 16 在 SubscribeNet 窗口中，输入您在步骤 3 中记下的 MAC 地址和名称。  
将 **MAC 地址** 输入 **主机 ID** 字段，将 **名称** 输入 **主机名称** 字段。输入计算机的“说明”。
- 17 使“要生成的许可证数量”方框保持默认设置值 1 不变。

**注意**

注册学术许可证授权代码时，请在“要生成的许可证数量”方框中输入 1。

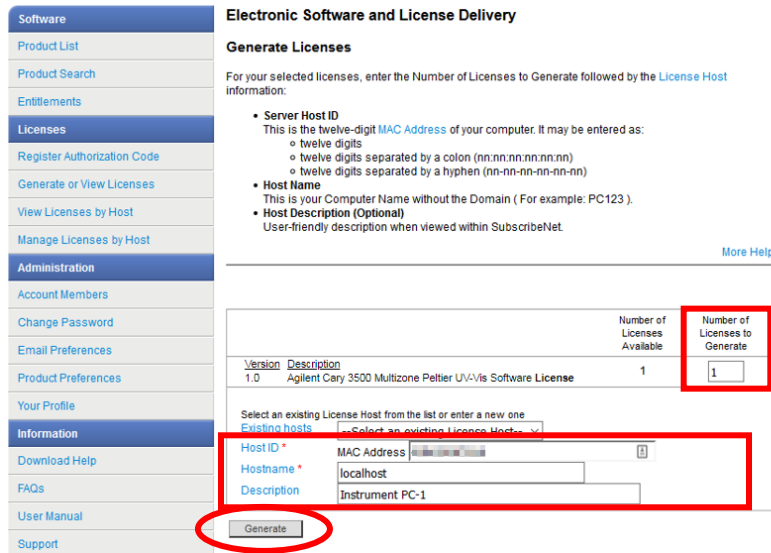

- 18 单击**生成**以生成许可证文件。
- 19 单击**下载许可证文件**。可能将出现一个对话框。按照提示保存文件，或记下文件的自动保存位置，通常是 C:\Users\Username\Downloads 文件夹。

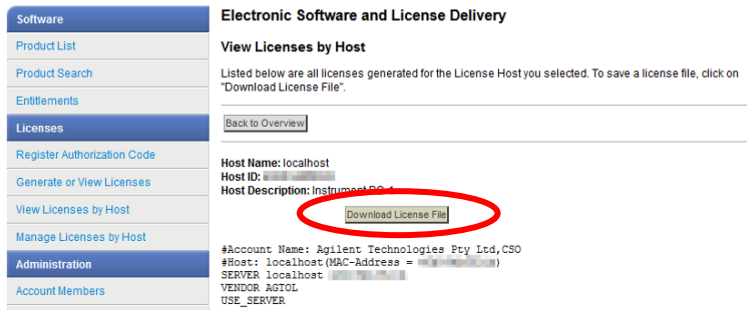


**注意**

如果您正在执行此注册的计算机并非安装了 Cary UV Workstation 软件的计算机，请导航到已保存的许可证文件，然后将其保存到 USB 驱动器。


将 USB 驱动器插入安装 Cary UV Workstation 软件的计算机，然后再执行下一步。

要将许可证文件导入“OpenLab 控制面板”：

20 在“OpenLab 控制面板”中，单击添加许可证。

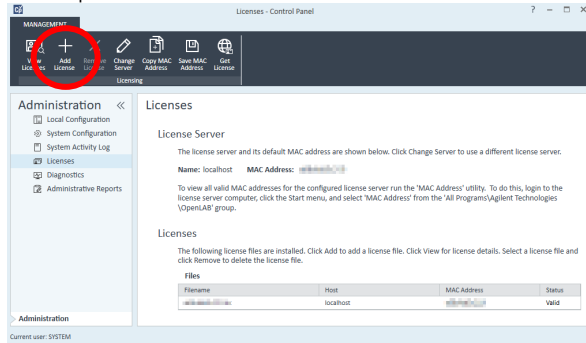

21 单击选择许可证文件，然后单击浏览。

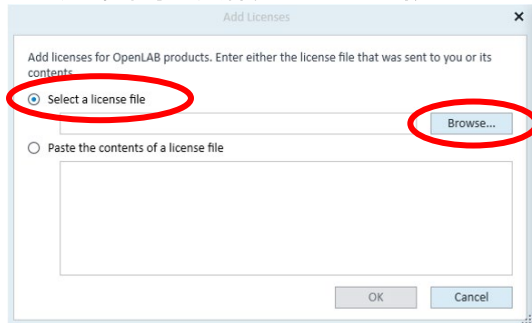

22 导航到计算机或 USB 上您之前保存的许可证文件，将其选中。单击打开。

23 选择确定以添加您的许可证。

24 现在，当您单击“生成或查看许可证”时，许可证将出现在“OpenLab 控制面板”和 SubscribeNet 的许可证列表中。

25 重新启动计算机以完成该过程。

**注意**

注册学术许可证授权代码时，请在每台安装 Cary UV Workstation 软件的计算机上重复步骤 2-5，然后重复步骤 14-25。您需要使用与首次注册时完全相同的凭据登录 SubscribeNet，然后再继续执行步骤 14。

This information is subject to change without notice.



G5191-90005

Edition 12/18  
Issue 2  
Printed in USA

© Agilent Technologies, Inc. 2018

Agilent Technologies Australia [M] Pty Ltd  
679 Springvale Road  
Mulgrave, VIC 3170, Australia

