



适用于 Waters Alliance 系统的安捷伦液相色谱备件

充分发挥所有品牌液相色谱仪的 仪器性能

The Measure of Confidence



Agilent Technologies

现在您可以为您的沃特世液相色谱仪节省相同的时间和成本

Agilent A-Line 接头用于安捷伦液相色谱系统（例如，Agilent 1290 Infinity II LC）时能够提供成熟可靠的分析性能和较低的使用维护成本。现在，您可以利用新型 0.25 mm 内径毛细管为您的 Waters Alliance 液相色谱仪节省相同的时间和成本。

这些创新性产品旨在帮助您解决妨碍工作效率的日常难题。此外，这些产品由安捷伦专业设计并经过质量检测，同时由技术支持资源提供保障。

使用 A-Line Quick Connect 快速连接接头确保始终获得完美的色谱柱连接

- 真正的手紧式连接：无需特殊培训，并且用户体验水平的差异不会对色谱图造成影响
- 零死体积：采用内置弹簧式设计，能够将管线推入接口底部
- 兼容所有类型的色谱柱：只需调整密封垫圈即可实现
- 牢固密封，可重复连接 200 多次
- 在高达 1300 bar (18850 psi) 的压力下依然保持稳定
- 快速、轻松连接可节省时间、减少故障 — 尤其适用于方法开发和色谱柱测试
- 更低的使用维护成本：不会发生接头或色谱柱断裂



操作简单，只需关闭控制杆即可：专利的安捷伦技术拥有内置弹簧式设计，可实现零死体积和稳定、牢固的连接

A-Line Quick Connect 快速连接接头助您快速轻松获得更可预测的结果

这些可重复使用的接头是可在 1300 bar 压力下保持稳定的一款真正的“手紧式”接头。无需使用工具，只需用手指关闭控制杆即可随时实现完美的连接。

遇到瓶颈？

不妨试试 A-Line Quick Turn 接头

如不需要 Quick Connect 快速连接接头的超高压力，您也可以选择 Agilent A-Line Quick Turn 接头。和我们的 Quick Connect 快速连接接头一样，Quick Turn 接头也采用了专利的弹簧式设计，确保零死体积，而且连接可靠。

说明：这些接头只可用于长套管的毛细管。关于可提供的毛细管的完整清单，请查看订购信息。



适用于 Waters Alliance 检测器的耐用紫外灯助您获得出色结果

- 大大提高强度和信噪比：准确对准，完美匹配检测器的光学配置
- 确保长寿命，降低使用维护成本
- 经认证、可追踪的制造过程
- 自动化生产，大大降低灯与灯之间的差异
- 厚度一致的高品质灯玻璃，可确保一致的光谱
- 在原仪器上经过严格测试
- 双层绝缘电缆符合严格的安全法规要求
- 坚固耐用的灯头设计，实现更高的可用性




长寿命氙灯, 8005-0704

适用于 Waters 2487 检测器的新款紫外灯具有更长的使用寿命和更高的强度, 并可改善定量分析结果, 降低使用维护成本

为了优化用于 Waters 2487 检测器的紫外灯质量, 安捷伦采用与自有紫外灯相同的制造标准进行生产。

使用寿命长：即使运行 2000 小时后，参比能量仍为初始能量的 50% 以上

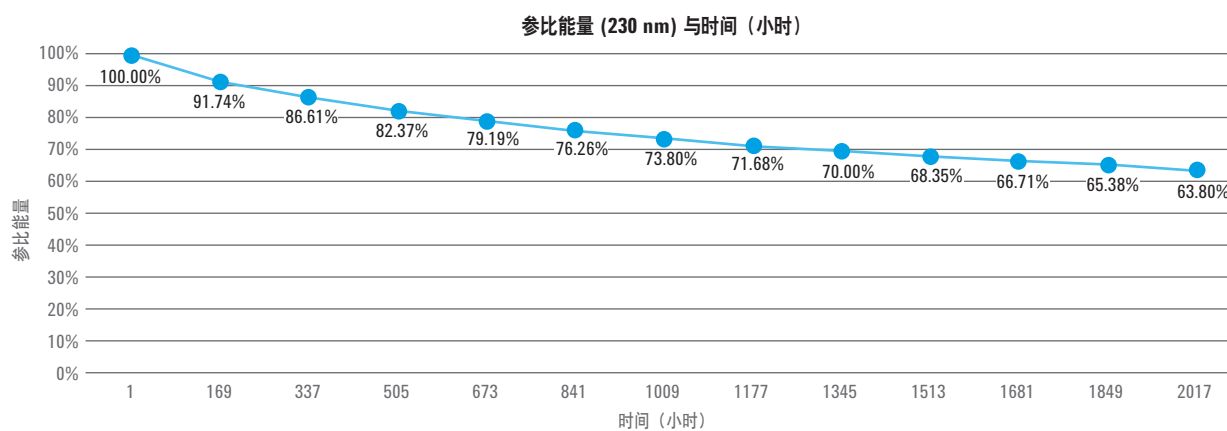

安捷伦特有的阴极涂覆工艺可大大减少强度随时间的下降, 使灯的使用寿命延长 50% 以上。所有安捷伦长寿命氙灯都可确保 2000 小时以上的使用寿命

订购信息

A-Line Quick Connect Fittings 快速连接接头	部件号
--------------------------------------	-----

组件

不锈钢, 0.25 × 105 mm, 带内螺纹接头 5067-6210

更换部件

Quick Connect 快速连接液相色谱接头 5067-5965

前密封垫圈 5043-0924

毛细管

不锈钢, 0.25 × 105 mm, 带内螺纹接头 5500-1258

不锈钢, 0.25 × 150 mm 5500-1259

不锈钢, 0.25 × 400 mm 5500-1260

A-Line Quick Turn 部件	部件号
----------------------	-----

接头和密封垫圈

Quick Turn LC 接头 5067-5966

前密封垫圈 5043-0924

毛细管

不锈钢, 0.25 × 105 mm, 带长套管和内螺纹接头 5500-1261

不锈钢, 0.25 × 150 mm, 带长套管 5500-1262

不锈钢, 0.25 × 400 mm, 带长套管 5500-1263

检测器灯, 1/包			
型号	描述	类似的沃特世部件号	部件号

2487 双波长吸收检测器

2488 多通道吸收检测器 长寿命氘灯, 2000 小时 WAS081142 8005-0704

ACQUITY TUV 检测器

UPLC TUV 检测器

适用于沃特世液相色谱系统的 Agilent A-Lines 备件助您获得所需的结果。

请访问 www.agilent.com/chem/productivitywaters

利用安捷伦仪器、色谱柱和备件更轻松地完成实验室工作

Poroshell 120 色谱柱

在现有液相色谱系统中充分利用亚 2 μm 色谱柱的性能优势。这类创新型色谱柱能够在任何主流液相色谱仪的压力范围内实现耐用、高分离度的分离。

www.agilent.com/chem/discoverporoshell

配备 ISET 的 1290 Infinity II 能够模拟 Waters Alliance

为分析、仪器和实验室效率树立全新标杆。

www.agilent.com/chem/1290

安捷伦样品前处理产品

大大减小实验室差异并提高分析效率, 获得一致的流量、洁净度和回收率。

www.agilent.com/chem/sampleprep

查找当地的安捷伦客户中心:

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线:

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们:

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn

安捷伦培训中心:

<https://www.agilent.com.cn/zh-cn/training-events/events/agilent-education>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊:

www.agilent.com/chem/accessagilent-cn

本文中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。

© 安捷伦科技(中国)有限公司, 2015
2015年12月8日, 中国出版
5991-6533CHCN



Agilent Technologies