





Agilent 1290 Infinity LC 世界最高速のHPLC分析



- 耐圧120 MPa
- 高流速による超高速分析
- ロングカラムによる高分離
- 究極の低キャリーオーバー
- 超高感度ダイオードアレイ検出器
- あらゆるHPLC、超高速 (UHP) LCからのメソッド変換
- MSの理想的なフロントLC

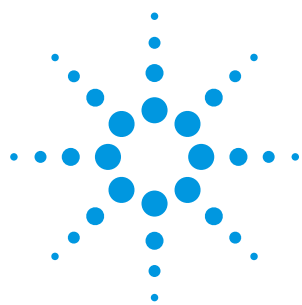

Agilent 1290 Infinity

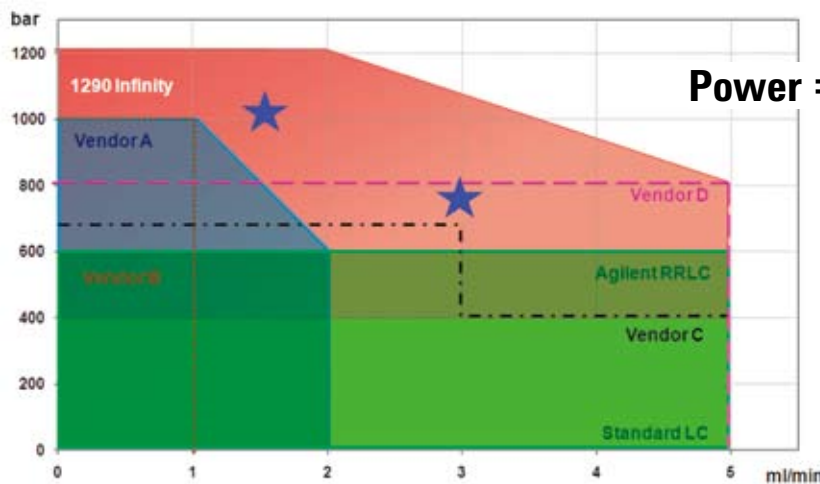


Power = Pressure x Flow Rate

従来にはない
高分離分析
超高速分析
ピークキャパシティ
高い柔軟性
さまざまな有機溶媒の利用
低いカラム温度の利用

1200bar=120MPa=17400psi


Agilent 1290 Infinityによる酸化防止剤の分析

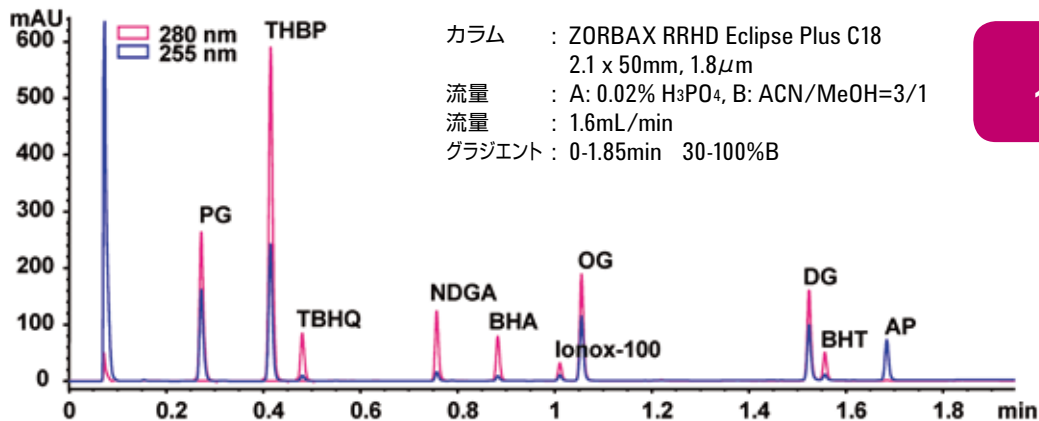

**Pmax
107MPa**

Data Courtesy of: Gerd Vanhoenacker Research Institute for Chromatography Belgium

Agilent 1290 Infinityによるトランキライザーの分析

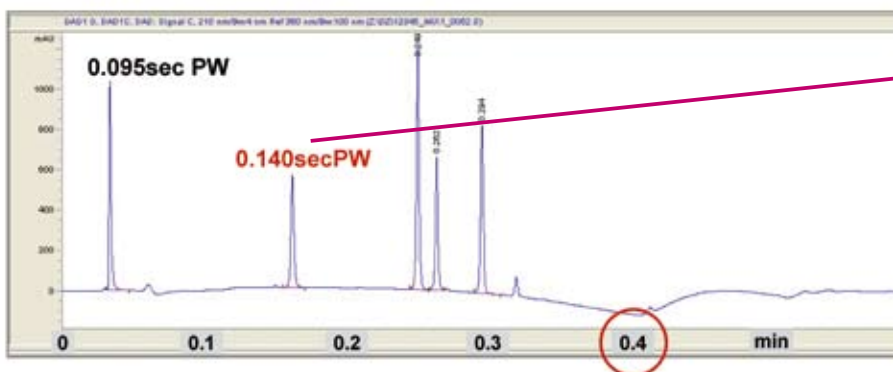

**ピークキャパシティ
170 / 0.4min**

カラム : 表面多孔性充てん剤
50 x 2.1mm, 2.7μm
流量 : 3.5mL/min, ~70MPa
グラジエント : 2-92% ACN in 0.4min
温度 : 80℃

アジレント・テクノロジー株式会社

本社/〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111

※仕様は予告なく変更する場合があります。

www.agilent.com/chem/jp

Printed in Japan. Sep.1, 2009

5990-4841JAJP



Agilent Technologies