


Maksymalna elastyczność oczyszczania próbek

Rozwiązania LC Purification Solutions marki Agilent InfinityLab

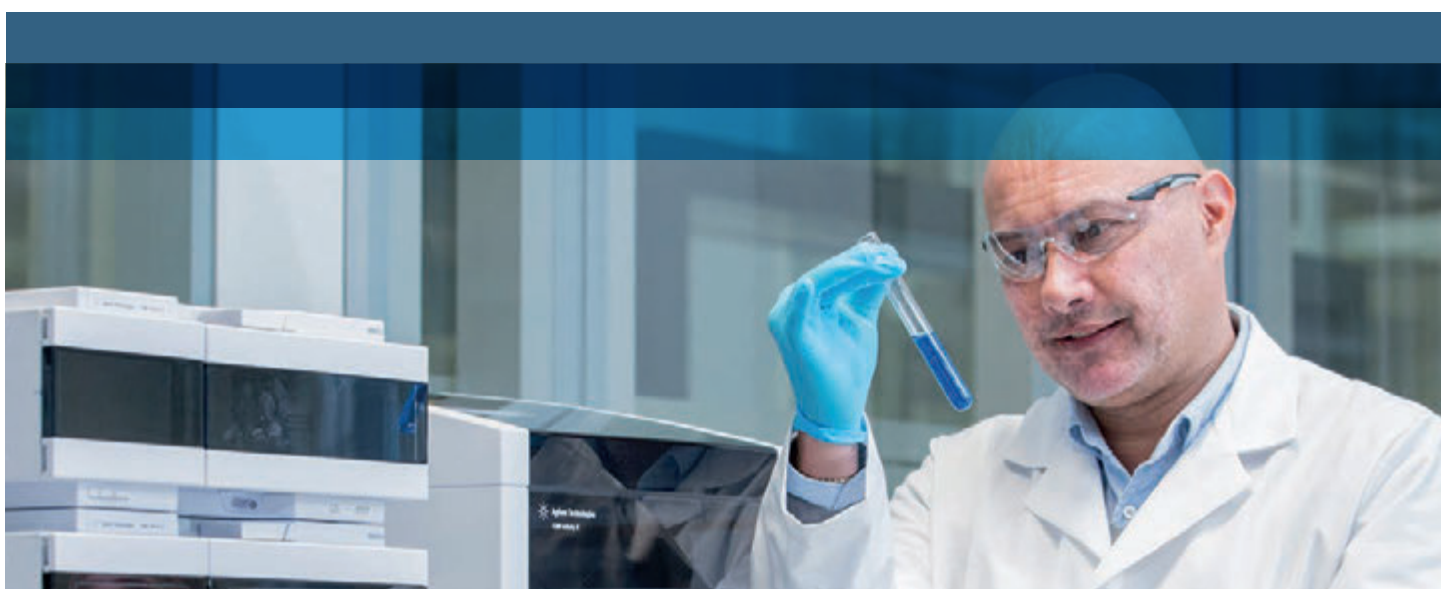

Maksymalna elastyczność oczyszczania próbek

Rozwiązania LC Purification Solutions marki Agilent InfinityLab obejmują wysokosprawną aparaturę, kolumny, oprogramowanie i usługi przeznaczone do izolacji i oczyszczania próbek z wyjątkową czystością i odzyskiem w ramach procedur w różnych skalach – od analitycznej do preparatywnej. Kompleksowa i skalowalna gama produktów bazująca na jednej platformie umożliwia dostosowanie systemu do obecnych i przyszłych potrzeb laboratorium.

Szeroka gama elastycznych rozwiązań do oczyszczania

Firma Agilent oferuje wysoce wydajne rozwiązania do oczyszczania przeznaczone do różnorodnych procesów – od izolacji związków w skali analitycznej do oczyszczania wielu gramów w skali preparatywnej.

Kompleksowa i skalowalna gama najnowocześniejszych urządzeń bazuje na jednej platformie. Opracowano ją na podstawie ponad 40-letniego doświadczenia w technologii oczyszczania metodą LC.

Rozwiązania do oczyszczania firmy Agilent idealnie współdziałają z kolumnami i materiałami eksploatacyjnymi marki InfinityLab. Wydajność procesów oczyszczania można zmaksymalizować poprzez nadzór nad nimi za pomocą oprogramowania OpenLab CDS ChemStation oraz dzięki wsparciu w postaci planów serwisowych CrossLab dla urządzeń i przedsiębiorstw.

Możliwość dostosowania systemu do własnych potrzeb istotnie zwiększa wydajność operacyjną laboratorium.

Działania firmy Agilent skupiają się na dostarczeniu produktów umożliwiających sprostanie trudnościom związanym z oczyszczaniem. Podczas projektowania naszych rozwiązań skupiamy się na trzech aspektach operacyjnych – to właśnie one są kluczem do powodzenia procedury.

- **Skuteczne oczyszczenie** – każde rozwiązanie do oczyszczania LC marki Agilent InfinityLab umożliwia osiągnięcie maksymalnej czystości i maksymalnego odzysku. Szeroka gama detektorów, w tym wyzwianie zbierania frakcji na podstawie masy, nie dopuszcza do pominięcia jakichkolwiek związków.
- **Wysokosprawną aparaturę** – możliwość skalowania natężenia przepływu i pojemności pozwala na bezstratne oczyszczanie od kilku miligramów do wielu gramów materiału. Czysta i zorganizowana konfiguracja usprawnia codzienną pracę.
- **Skuteczność pracy w laboratoriach** – małe rozmiary i możliwość rozbudowy urządzeń odpowiednio do rosnących potrzeb biznesowych. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo pracy i stałą ochronę laboratorium.



Systemy 1290 Infinity II Preparative LC System

Wydajny system oczyszczania w laboratorium

System umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności w procesach oczyszczania. Wyjątkowa elastyczność pozwala rozwiązywać wszystkie problemy związane z oczyszczaniem, zwiększając czystość, odzysk i szybkość procesu.



Systemy 1260 Infinity II Preparative LC System

Wydajne oczyszczanie na co dzień

Najbardziej przystępny cenowo kolektor frakcji umożliwia osiągnięcie wysokiej czystości i dużego odzysku. Duża elastyczność rozmiaru frakcji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej precyzji odzysku.



Systemy 1220/1260/1290 Infinity II Analytical-Scale LC Purification System

Izolacja związków w skali analitycznej

Wysokosprawna separacja i minimalne rozmywanie się zbieranych frakcji umożliwiają wyizolowanie żądanych związków. Do oczyszczania białek i próbek wrażliwych dostępna jest wersja obojętna biologicznie.

	Skala analityczna		Skala półpreparatywna		Skala preparatywna	
Zakres działania	Mikrogramy	Miligramy		Gramy		
Systemy Agilent 1290 Infinity II Preparative LC	1 – 50 ml/min				4 – 200 ml/min	
Systemy Agilent 1260 Infinity II Preparative LC	1 – 50 ml/min					
Systemy Agilent 1220/1260/1290 Infinity II Analytical-Scale LC Purification	0,01 – 10 ml/min					
Wewnętrzna średnica kolumny	4,6 mm	10 mm (½ cala)	20 – 25 mm (1 cal)	30 mm	50 mm (2 cale)	
Typowe natężenie przepływu (ml/min)	1	4,7	20 – 25	42	118	

Możliwość rozszerzenia zakresu przepływu dzięki wymiennym głowicom pomp

Bezpieczna inwestycja w rozwiązanie zapewniające doskonały odzysk

Zakup rozwiązania do oczyszczania metodą LC marki Agilent InfinityLab to pewna inwestycja w przyszłość. Płynna integracja urządzeń, technologii kolumn i oprogramowania zapewnia wysoką wydajność i najwyższą produktywność.

Przyszłościowa inwestycja

Rozwiązania LC Purification Solutions marki InfinityLab bazują na wspólnej platformie. Do wyboru dostępne są systemy wstępnie skonfigurowane lub rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, spełniające określone wymagania w zakresie oczyszczania na potrzeby odkrywania substancji, badań naukowych lub produkcji na małą skalę. Możliwość bezproblemowej rozbudowy systemu pozwala na zwiększenie zdolności pojemnościowych w odpowiedzi na zmieniające się wymagania.


Wiarygodne dane

Technologia detekcji opóźnienia firmy Agilent automatycznie wykrywa zwłokę opóźnienia i zapewnia, że frakcje są zbierane w odpowiednim momencie – bez konieczności zbierania zbędnych objętości.

Wybrane detektory mogą wyzwać dowolną kombinację zbierania frakcji w oparciu o czas, piki lub masę. Sieć CAN (Control Area Network) pozwala na inteligentne przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w celu natychmiastowego, precyzyjnego zbierania frakcji.

Odzysk próbek

Z rozwiązaniami LC Purification Solutions marki InfinityLab próbki są bezpieczne. Kolektory odzysku frakcji gwarantują, że cenne próbki nie trafią do odpadów, tylko w bezpieczne miejsca, z których można je łatwo odzyskać. Dodanie kolektora odzysku frakcji do systemu oczyszczania zwiększa ochronę próbek, a także przepustowość, pojemność i wydajność.

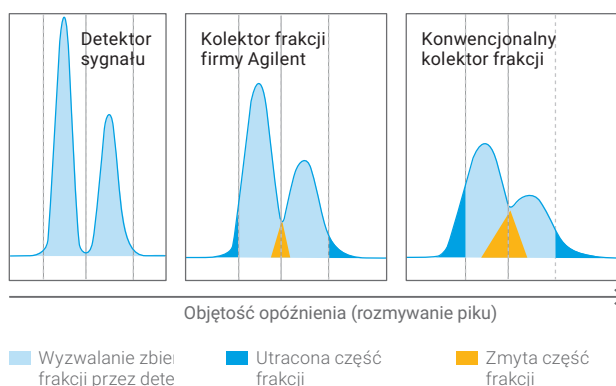

Kolektory odzysku frakcji firmy Agilent zaprojektowano z myślą o małych objętościach opóźnienia, aby uniknąć rozmywania pików i przeniesień między frakcjami, zapewniając wysoką czystość i duży odzysk frakcji.

Ponad 40-letnie doświadczenie w opracowywaniu innowacji technologicznych

Dziesiątki tysięcy laboratoriów na całym świecie polegają na rozwiązaniach firmy Agilent do oczyszczania metodą LC, które zapewniają niezwykłą wydajność, produktywność i niezawodność podczas izolacji i oczyszczania związków o wysokiej wartości, takich jak aktywne związki farmaceutyczne, peptydy, białka i wysokowartościowe związki chemiczne.

Niezawodność zapewniająca optymalny czas pracy

Współpraca z firmą Agilent to inwestycja w sprawdzone i długoletnie doświadczenie w dziedzinie oczyszczania. Gwarantujemy, że każdy system został zaprojektowany i wyprodukowany z wykorzystaniem części najwyższej jakości, aby zapewnić długi czas bezawaryjnej pracy i minimalne wymagania konserwacyjne. Zaawansowane wbudowane narzędzia diagnostyczne i konserwacyjne zapewniają niezawodną i bezpieczną pracę. Sieć CAN oferuje modułowe narzędzia inteligentne zapewniające doskonałą elastyczność pracy.




Wzorzec w dziedzinie oczyszczania

System 1290 Infinity II Preparative LC System stanowi ucieleśnienie urządzeń nowej generacji do preparatywnej LC, zapewniających ultrawysokosprawne oczyszczanie.

Zautomatyzowane obliczanie profili gradientów dla każdego związku docelowego zapewnia wysoką czystość i duży odzysk.

Szeroka gama detektorów do wyzwalania zbierania frakcji – w tym detekcja na podstawie masy – umożliwia uzyskanie wysokiej czystości i dużego odzysku.

Podajnik próbek/kolektor frakcji 1290 Infinity II Preparative Open-Bed Sampler/Collector optymalizuje przestrzeń na stanowisku pracy. Wbudowana kalibracja opóźnienia frakcji we wszystkich kolektorach frakcji marki InfinityLab.

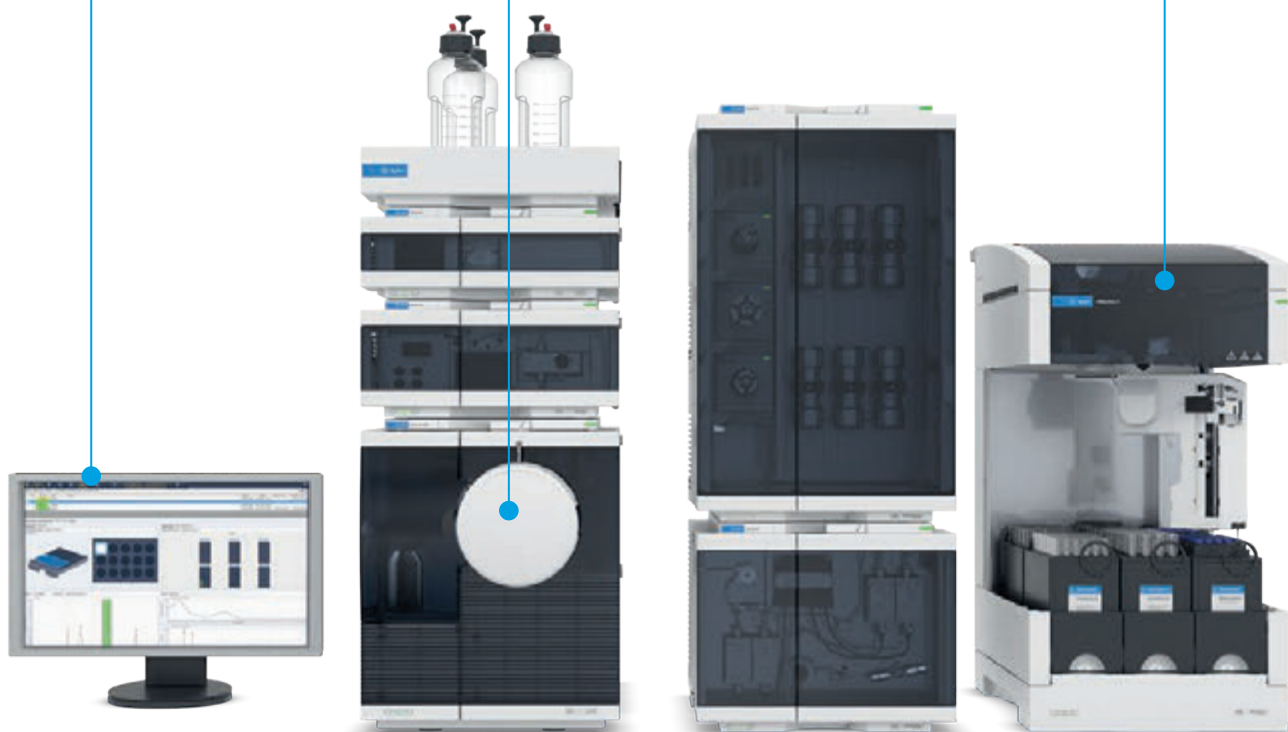

Skuteczne oczyszczanie

W systemie 1290 Infinity II Preparative LC System połączono techniki identyfikacji pików w oparciu o promieniowanie UV i masę, co optymalizuje zbieranie frakcji.

- Zakres mocy 600 barów przy 50 ml/min i 420 barów przy 200 ml/min zapewnia większą rozdzielczość
- Najniższa objętość opóźnienia minimalizuje rozmywanie pików i przeniesienia, zapewniając najwyższy odzysk i czystość
- Zbieranie frakcji w oparciu o masę umożliwia zwiększenie ilości oczyszczonej substancji na czas pracy jednostki i zmniejsza ryzyko powtarzania analizy.

Ultrawysokosprawna aparatura

Podajnik próbek/kolektor frakcji 1290 Infinity II Preparative Open-Bed Sampler/Collector łączy w pełni zautomatyzowaną obsługę fiolek i płytek mikrotitracyjnych w jednym module.

- Możliwość nastrzykiwania do 864 próbek lub zbierania do 432 frakcji (lub dowolnej kombinacji) zapewnia pełną elastyczność
- Natężenia przepływu do 200 ml/min umożliwiają zastosowanie kolumn o średnicy wewnętrznej 50 mm, co zmniejsza liczbę wymaganych nastrzyków i pozwala na uzyskanie większej ilości oczyszczonych związków na czas pracy jednostki
- Mniejsza liczba zbieranych frakcji optymalizuje wykorzystanie przepustowości i czas pracy urządzenia

Wydajność pracy w laboratoriach

Połączenie oprogramowania Automated Purification firmy Agilent z systemem OpenLab CDS ChemStation umożliwia pełną automatyzację procedur.

- Najwyższe zagęszczenie frakcji na przestrzeń zajmowaną przez jednostkę
- Możliwość dostosowywania liczby frakcji odpowiednio do potrzeb, maksymalnie do 1296 frakcji
- Łatwość wymiany głowic pomp umożliwia rozszerzenie zakresu natężenia przepływu do 200 ml/min



Modulator MS Flow
Modulator zapewnia kontrolowany i odtwarzalny stosunek podziału podczas zastosowań wykorzystujących zbieranie frakcji na podstawie masy.



Moduł 1290 Infinity II Preparative Column Compartment zapewnia dużą elastyczność montażu i rozmieszczenia kolumny do analitycznej i preparatywnej LC, zaworów, pętli opóźniających i modulatora przepływu MS Flow Modulator. Moduł ten można połączyć z dowolnym rozwiązaniem do oczyszczania metodą LC marki Agilent InfinityLab w celu istotnego zwiększenia produktywności.

Pewność podczas codziennych procedur oczyszczania

System Agilent 1260 Infinity II Preparative LC to dedykowane rozwiązanie o skalowalnej przepustowości – od oczyszczania kilku próbek do zautomatyzowanego oczyszczania setek próbek bez nadzoru operatora.

Nowy poziom niezawodności oczyszczania – podczas codziennych, różnorodnych procedur – w przystępnej cenie.

Moduł 1260 Infinity II Column Organizer, zgodny z każdym rozwiązaniem do oczyszczania metodą LC marki InfinityLab, umożliwia wygodny montaż ręcznego zaworu do nastrzyków i kolumn do analitycznej i preparatywnej LC oraz kontrolowanie tych elementów.



Nastrzykiwanie z fiolek mikrolitrowych do mililitrowych objętości próbki do oczyszczania metodą LC w skali preparatywnej.



Możliwość bezproblemowej rozbudowy pozwala na zwiększenie zdolności pojemnościowych odpowiednio do potrzeb.





Wysokosprawna aparatura

System 1260 Infinity II Preparative LC System zwiększa elastyczność pracy w laboratorium. Łatwa skalowalność procedur — od zadań analitycznych do zadań związanych z oczyszczaniem — przy minimalnym przeszkoleniu personelu.

- Natężenia przepływu do 50 ml/min umożliwiają stosowanie kolumn o średnicy wewnętrznej do 30 mm
- Wprowadzanie próbek za pomocą łatwego w obsłudze nastrzykiwacza ręcznego lub w pełni zautomatyzowanego podajnika próbek współpracującego z fiolkami z możliwością nastrzykiwania do 3,6 ml z maksymalnie 132 próbek
- Cztery średnice zewnętrzne wężyków do frakcjonowania umożliwiają zebranie do 216 frakcji na moduł

Wydajność pracy w laboratoriach

Najbardziej przystępny cenowo kolektor frakcji umożliwia osiągnięcie wysokiej czystości i dużego odzysku. Duża elastyczność rozmiaru frakcji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej precyzji odzysku.

- Zoptymalizowane konfiguracje jednomodułowe zapewniają wysoką przepustowość urządzenia, które zajmuje mało miejsca w laboratorium
- Możliwość zwiększenia przepustowości do 648 frakcji w ramach jednego modułu
- Możliwość bezproblemowej rozbudowy stanowi ochronę dla inwestycji

Skuteczne oczyszczanie

System 1260 Infinity II Preparative LC System to niezawodny system do codziennych zadań w zakresie oczyszczania. Możliwość bezproblemowego łączenia systemu z kolumnami do preparatywnej LC, a także możliwość korzystania z zaawansowanych materiałów eksploatacyjnych gwarantuje znakomitą funkcjonalność procesu oczyszczania.

- Automatyczna kalibracja opóźnienia i możliwość wykorzystania wielu detektorów zapewnia doskonały odzysk i czystość
- Duża elastyczność rozmiaru frakcji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej precyzji odzysku próbek
- Doskonała zgodność z kolumnami i materiałami eksploatacyjnymi gwarantuje skuteczność separacji i detekcji



Kolektor frakcji 1260 Infinity II Preparative Valve-Based Fraction Collector to prosta, ale solidna podstawa systemu do oczyszczania. Moduł ten zawiera jeden port wlotowy, 11 portów do zbierania frakcji i jeden port odpływu odpadów, co ułatwia izolację związków.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb użytkownika


Dostępna gama modułów dostarczania rozpuszczalnika, nastrzykiwaczy, detektorów i kolektorów frakcji umożliwia dostosowanie systemu do własnych potrzeb. Oprogramowanie do zautomatyzowanego oczyszczania, które pozwala na automatyczne przejście z procesów analitycznych do procesów oczyszczania w skali preparatywnej, zwiększa wydajność laboratorium.

Szczegółowe informacje zawiera dokument InfinityLab LC Purification Selection Guide (numer publikacji: 5991-9153EN).

Możliwość wymiany modułów odpowiednio do potrzeb

Możliwość dodania modułów w celu zwiększenia wydajności systemu

Możliwość dodania modułu autonomicznego do dowolnego systemu

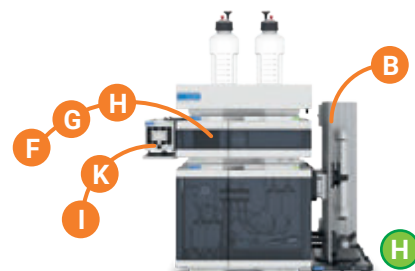

System Agilent 1260 Infinity II Manual Preparative LC System

Przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające na dwuskładnikowe gradienty i ręczne nastrzykiwanie próbki w celu oczyszczania miligramowych ilości.



System Agilent 1290 Infinity II Preparative LC System

Połączenie automatycznego nastrzykiwania próbek z łatwością dostępu do czterech kolumn analitycznych i sześciu kolumn preparatywnych.



System Agilent 1290 Infinity II Autoscale Preparative LC System

Obliczanie „w locie” dedykowanych gradientów dla każdego związku docelowego w celu zapewnienia wysokiej czystości zebranych frakcji.

Moduły



Agilent 1260 Infinity II Preparative Column Organizer



Agilent 1290 Infinity II Preparative Column Compartment



Agilent 1260 Infinity II Preparative Manual Injector



Agilent 1290 Infinity II Preparative Open-Bed Sampler / Collector



Agilent 1260 Infinity II Variable Wavelength Detector




Agilent 1260 Infinity II Diode Array Detector WR




**System Agilent 1260
Infinity II
Preparative LC System**

Nowy poziom automatyzacji i pewności w codziennej pracy z ekonomicznym systemem do oczyszczania.

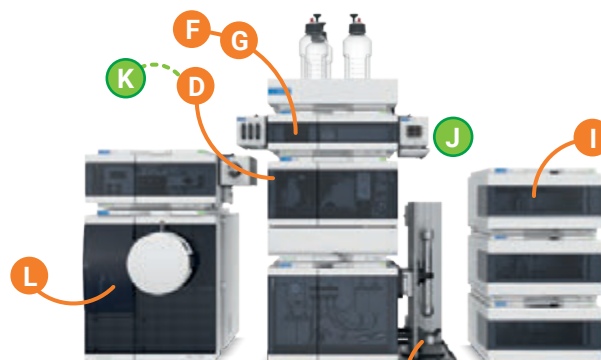

**System Agilent 1260 Infinity II
Preparative LC/MSD System**

Możliwość konfiguracji z detektorami UV i MS, automatycznym podajnikiem próbek i kolektorami frakcji umożliwia sprostanie potrzebom w zakresie automatyzacji i przepustowości.

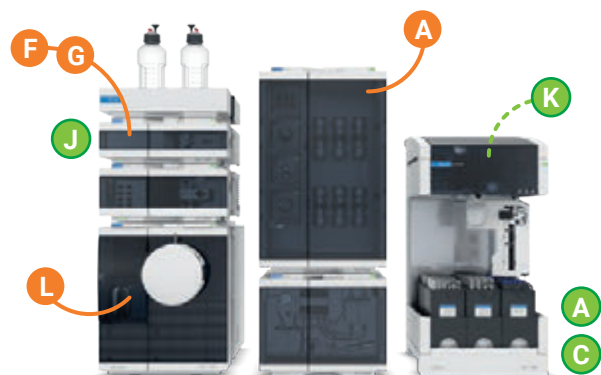

System Agilent 1290 Infinity II Preparative LC/MSD System

Pełna elastyczność zastosowań w zoptymalizowanej przestrzeni roboczej i dokładne wyzwalanie zbierania frakcji na podstawie masy.



System Agilent 1290 Infinity II Autoscale Preparative LC/MSD System

Wysoce wydajny system umożliwiający bezpośrednie zwiększanie skali – od procedur rozwoju metody w skali analitycznej do procedur oczyszczania gramowych ilości związków chemicznych.



Agilent 1260 Infinity II
Multiple Wavelength
Detector



Agilent 1260 Infinity II
Evaporative Light
Scattering Detector



Agilent 1260 Infinity II
Preparative Fraction
Collector



Agilent 1260 Infinity II
Preparative Valve-Based
Fraction Collector



Agilent 1290 Infinity II
Preparative Open-Bed
Fraction Collector



System LC/MSD XT
System firmy
Agilent

Przewidywalne skalowanie metody, długa żywotność kolumny i lepsza wydajność

Kolumny preparatywne i materiały eksploatacyjne marki InfinityLab pozwalają zmaksymalizować wydajność i niezawodność procesów oczyszczania. Firma Agilent oferuje wiele rozwiązań, które umożliwiają sprostanie wyzwaniom napotykanym podczas preparatywnej LC – niezależnie od zastosowania.

Kolumny Load & Lock zwiększają ekonomiczność i elastyczność systemu

Kolumny Load & Lock firmy Agilent są dostępne w różnych średnicach i długościach. Można je upakowywać dowolnymi materiałami dostępnymi na rynku, dzięki czemu są to ekonomiczne i uniwersalne rozwiązania przeznaczone do wysokosprawnego, wysokoprzepustowego i wysoce wydajnego oczyszczania w skali preparatywnej.

Specjalnie opracowane płytki do rozprowadzania cieczy i próbek umożliwiają nałożenie o 20% więcej próbki przy jednoczesnym minimalizowaniu ciśnienia wstecznego i rozszerzenia piku. Wszystkie kolumny Load & Lock są wyposażone w płaszcz wodny ze stali nierdzewnej przeznaczony do regulacji temperatury.

Za pomocą jednej stacji przenośnej można upakować dowolną liczbę kolumn o średnicy wewnętrznej 1, 2 i 3 cale. Funkcja odłączania od stacji umożliwia rozmieszczenie upakowanych kolumn w dowolnym miejscu w placówce.



Kolumny do preparatywnej LC marki InfinityLab umożliwiają niezawodne zwiększenie skali zastosowań w zakresie małych cząsteczek

Kolumny do preparatywnej LC marki Agilent InfinityLab zoptymalizowano przy użyciu specjalnie opracowanego procesu upakowywania w celu zapewnienia doskonałej stabilności i trwałości złoża. Kolumny te są dostępne z różnymi nośnikami, takimi jak Pursuit XRs o dużej pojemności, ZORBAX o zróżnicowanej selektywności lub Poroshell 120 o możliwości stosowania dużej szybkości i o wysokiej wydajności, dzięki czemu możliwe jest dobranie ich odpowiednio do potrzeb w zakresie oczyszczania.

Kolumny PLRP-S przeznaczone do wymagających cząstek biologicznych


Kolumny PLRP-S firmy Agilent są dostępne z różnymi wielkościami porów i cząstek, ale wszystkie mają identyczny skład chemiczny i podstawowe właściwości adsorpcyjne, przez co są doskonałym wyborem do separacji dużych cząsteczek. Cząstki te są natywnie hydrofobowe, więc do separacji metodą odwróconej fazy nie jest wymagany ligand alkilowy związany z fazą.

Materiały eksploatacyjne marki InfinityLab ułatwiają obsługę systemu i zwiększając wydajność oczyszczania

Materiały eksploatacyjne do LC marki Agilent InfinityLab tworzą połączenia w ramach rozwiązania do oczyszczania metodą LC marki InfinityLab, umożliwiając osiągnięcie wyjątkowej wydajności i sprawności operacyjnej. Złączki InfinityLab Quick Turn z zestawami pętli opóźniających maksymalizują wydajność oczyszczania. Ergonomiczne butelki z rozpuszczalnikami usprawniają pracę w laboratorium, a nakrętki InfinityLab Stay Safe chronią przed szkodliwymi oparami rozpuszczalników.



Kolumny do preparatywnej LC marki Agilent InfinityLab charakteryzują się dużą ładownością, co umożliwia oczyszczanie produktów w ilościach od miligramowych do gramowych.

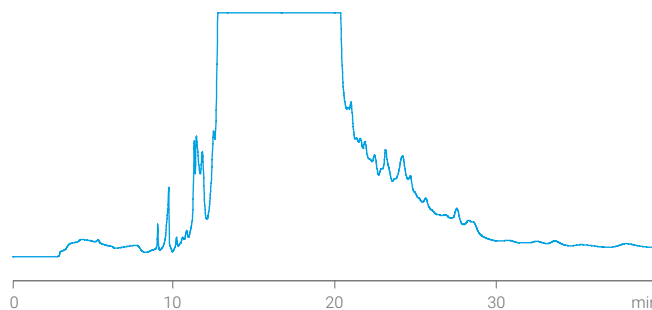

Oczyszczanie próbki tripeptydu phe-ile-val przy użyciu kolumny Agilent PLRP-S (100 Å, 10 µm). Jedna procedura oczyszczania umożliwiła uzyskanie 95% czystości i 86% wydajności.



Materiały eksploatacyjne marki InfinityLab idealnie pasują do rozwiązań LC Purification Solutions marki InfinityLab, łącząc łatwość obsługi z wydajnością dzięki najnowszym innowacjom.

Skuteczna kontrola dzięki oprogramowaniu OpenLab

Firma Agilent udostępnia rozwiązania w zakresie oprogramowania i rozwiązania informatyczne, które umożliwiają pełne wykorzystanie zalet systemów do oczyszczania metodą LC marki InfinityLab. System OpenLab CDS ChemStation marki Agilent to wydajne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, które zapewnia pełną kontrolę nad procesami oczyszczania w skali analitycznej i preparatywnej.

Dedykowane oprogramowanie zwiększające produktywność w laboratorium

Oprogramowanie Automated Purification firmy Agilent to łatwy do zainstalowania dodatek do systemu OpenLab CDS ChemStation, który ułatwia zautomatyzowane przenoszenie metod oczyszczania ze skali analitycznej do skali preparatywnej. Obliczanie „w locie” dedykowanych gradientów dla każdego związku docelowego zapewnia wysoką czystość frakcji zebranych podczas procedur oczyszczania w skali preparatywnej.

- Prawdziwie zautomatyzowane skalowanie od skali analitycznej do preparatywnej dzięki algorytmom matematycznym
- Nieskończona liczba dedykowanych gradientów zapewnia najwyższą czystość i największy odzysk
- Dedykowane gradienty zapewniają wysoką przepustowość próbek i niskie zużycie rozpuszczalnika
- Zautomatyzowane skalowanie niezależnie od zmiany wielkości cząstek, natężenia przepływu lub wymiarów kolumny
- Wykorzystanie logiki Bole'owskiej sygnału UV i masowego do wyzwalania zbierania frakcji
- Przeglądarka Fraction Result Browser wyświetla zebrane frakcje oraz dane widmowe UV i masowe





Powodzenie analiz laboratoryjnych

Usługi CrossLab firmy Agilent umożliwiają maksymalizację wydajności urządzeń. Nasze wiodące w branży usługi dostosowane do potrzeb klientów mogą przyczynić się do wydłużenia czasu bezawaryjnej pracy, ułatwienia uzyskiwania wiarygodnych danych, zachowania zgodności z przepisami i przewidywania kosztów. Wykwalifikowany zespół to klucz do sukcesu laboratorium, dlatego oferujemy również wszechstronne usługi w zakresie kształcenia — od poziomu początkującego do eksperckiego.

Usługi w zakresie zgodności

Nasza udostępniona w sieci platforma ACE upraszcza wprowadzanie i zachowywanie integralności danych, umożliwiając jednocześnie tworzenie elektronicznych raportów i korzystanie z podpisów elektronicznych.

Agilent University

Platforma szkoleniowa umożliwia uzyskanie wiedzy na temat zwiększania wydajności i minimalizowania przestoju. Dostępne są różnorodne szkolenia, w tym szkolenia „na miejscu”, wirtualne i online na żądanie.

Rozpoczęcie pracy z usługami CrossLab

Usługi w zakresie instalacji, wprowadzenia i asystenta First Run Assist umożliwiają przygotowanie miejsca, zapoznanie się z obsługą urządzenia i maksymalizację dokładności.

Usługi w zakresie metod i zastosowań

Współpraca z naszym globalnym zespołem ekspertów ds. zastosowań umożliwia rozwiązanie problemów związanych z zastosowaniami i skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie nowych metod.

Rozwiązania finansowe

Elastyczne plany ratalne umożliwiają zakup najnowszych innowacji — bez konieczności wpłacania dużej zaliczki.

Oferujemy wiele innych produktów i usług ułatwiających zarządzanie urządzeniami i laboratorium w celu uzyskania najlepszych wyników.

Więcej informacji na temat usług CrossLab oraz przykłady procedur prowadzących do uzyskania doskonałych wyników można znaleźć pod adresem: www.agilent.com/crosslab

Więcej informacji:

www.agilent.com/chem/infinitylab-lc-purification

Kup online:

www.agilent.com/chem/store

Stany Zjednoczone i Kanada

1-800-227-9770

agilent_inquiries@agilent.com

Europa

info_agilent@agilent.com

Azja i Pacyfik

inquiry_lsca@agilent.com

DE44475.2232638889

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Agilent Technologies, Inc. 2017, 2021
Wydano w USA, 1 października 2021 r.
5991-9154PL