



놀랍도록 강력하고, 탁월하게 효율적인 정량

LC/TQ의 표적 농약 스크리닝을 위한 Agilent MassHunter Productivity App

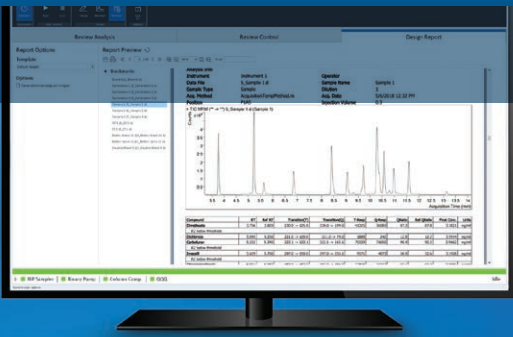

실험실 분석가들에게 40%의 시간을 더 줄 수 있다면?

데드라인이 다가올 때, 모든 기능을 완비한 복잡한 소프트웨어 패키지를 일상적인 작업 담당자가 사용하는 것은 생산성에 오히려 방해가 될 수 있습니다. LC/TQ의 표적 농약 스크리닝을 위한 Agilent MassHunter Productivity App은 최대의 효율성을 위해 원하는 기능만을 패키지화하여 제공합니다. 그 이점은 다음과 같습니다.

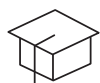

운영자 교육 필요성 감소



PC에서 소모되는 시간의 감소



간소화된 데이터 검토 및 보고서 생성

사용자가 최대 40%의 생산성 향상을 보고하는 것이 당연합니다

Productivity App은 데이터 수집 및 데이터 검토를 간소화된 단일 사용자 인터페이스 내에서 통합합니다. 앱에서 제시하는 수집 및 정량 분석법 및 사용자가 정의한 분석법 중에서 원하는 것을 선택하거나, 애질런트의 과학 및 기술 전문가 팀이 새로운 분석법 생성을 도와드립니다.



App에 포함된 내역은 다음과 같습니다.

- MassHunter Productivity App 소프트웨어
- 농약 다이내믹 MRM 데이터베이스 (700종 이상의 화합물과 각 화합물별 2~4개의 최적화된 MRM transition 및 머무름 시간 포함)
- 통합적인 워크플로 가이드
- LC/TQ 수집 및 정량 분석법
- 소모품 및 농약 표준품(옵션)
- 맞춤형 가능한 MassHunter 보고서 템플릿

통합로 향하는 지름길로 가십시오



쉽고 직관적: "샘플별" 또는 "화합물별" 보기 방식을 단순 클릭으로 전환하고, 개별 플래그 또는 관리자 정의 필터를 적용하여 데이터 검토 절차를 가속화합니다.

단일 사용자 인터페이스

데이터 수집과 검토를 통합하여 소프트웨어의 복잡성을 줄입니다.

원클릭 시퀀스 생성

시퀀스 템플릿을 사용하여 자동으로 샘플 목록을 불러오므로 시퀀스 설정 시간을 줄입니다.

빠른 분석법 편집

저장된 화합물 목록과 검량 테이블을 로딩하여 분석법 편집 시간을 줄입니다.

오류 없는 실행 설정

통합적인 설정 밸리데이션을 통해 예방 가능한 운영자 오류 발생으로 야기되는 시간 낭비를 감소시킵니다.

핸즈오프(Hands-off) 분석

자동 분석 및 각 실행마다 맞춰진 분석법 최적화로 운영자의 시간을 절약합니다.

표적 데이터 검토

그룹화, 필터링, 태깅 등을 통해 오직 유의미한 결과만을 직관적으로 검토할 수 있습니다.

유연한 보고서 작성

다루기 쉬운 보고서 템플릿과 내장된 보고서 미리보기 기능을 통해 더 빠르게 최적의 보고서를 생성합니다.

즉각적인 혜택

제공된 분석법을 비용이 드는 설정 과정 없이 바로 적용하거나, 기존에 사용하고 있던 분석법을 가동 중단 시간 없이 적용할 수 있습니다.

믿기 어려울 정도로 강력한 성능

Agilent Ultivo triple quadrupole LC/MS 시스템은 새로운 기술을 통해 정량 성능을 극대화하고, 기기 신뢰성을 높이며, 견고성을 향상시킵니다. 모든 것을 이 작은 크기의 기기로 누릴 수 있습니다. 또한 Agilent MassHunter 소프트웨어를 사용하여 Ultivo 작동 시, 다음과 같은 이유로 한층 빠르고 더 생산적인 MS 분석이 가능합니다.

- 업데이트된 사용자 인터페이스 및 데이터 수집 모드로 분석법과 워크리스트 상호작용 간소화
- 50% 더 빠른 autotune으로 감응 최적화 및 가동 시간 극대화
- 지능형 진단 리드백 기능으로 문제를 신속하고 정확하게 파악

추가 정보: www.agilent.com/chem/ultivo



LC/TQ의 표적 농약 스크리닝을 위한 MassHunter Productivity App에 대해 더 알아보시려면 다음을 방문하십시오.

www.agilent.com/chem/masshunter-productivity-apps

온라인 구매:

www.agilent.com/chem/store

MassHunter 소프트웨어에 대해 더 알아보십시오.

www.agilent.com/chem/masshunter

분석법 또는 응용 분석 컨설팅 견적서를 요청하십시오.

www.agilent.com/chem/workflows

미국 및 캐나다

1-800-227-9770

agilent_inquiries@agilent.com

유럽

info_agilent@agilent.com

인도

india-lsca_marketing@agilent.com

아시아 태평양

inquiry_lsca@agilent.com

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
2018년 9월 12일, 한국에서 발행
5991-9492KO

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr