



信心十足地进行痕量分析


采用安捷伦超高惰性进样口衬管（即使包含玻璃毛），获得稳定、可靠和可重现的惰性样品流路

无论您是分析环境行业中难分离的活性化合物，还是对滥用药物进行筛查，安捷伦超高惰性进样口衬管都能确保您得到惰性的 GC 流路，以获得较高的灵敏度，准确度和重现性。

信心来自于稳定的质量。安捷伦专有的生产流程生产的超高惰性衬管，经过严格的测试和认证，可确保：

- 批与批之间的产品卓越的一致性
- 基本没有流失或背景污染
- 卓越的样品覆盖性能，甚至适用于极高活性的化合物分析

异狄氏剂：100 ppb
衬管类型：不分流单锥形衬管，带玻璃毛
检测器：ECD

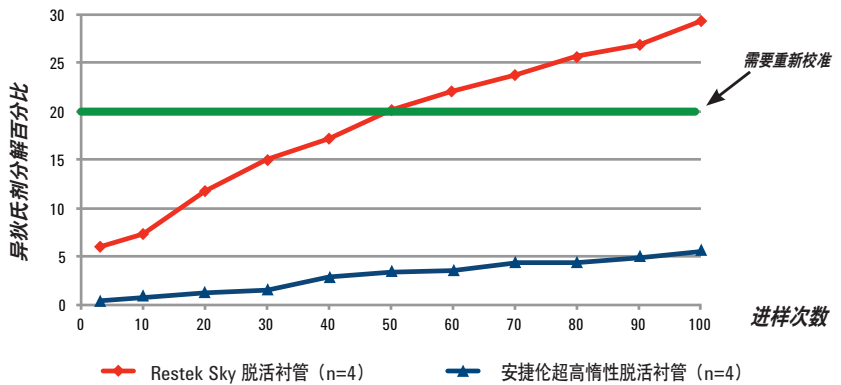

在异狄氏剂分解对比中，安捷伦超高惰性衬管（带玻璃毛）明显优于竞争产品（Restek Sky 衬管）

安捷伦超高惰性衬管家族的新成员，
包含更多配置和经济型大包装。





采用非接触式包装 避免衬管被污染

超高惰性进样口衬管采用安捷伦独有的非接触式包装，经过预清洗、预老化，而且预安装经等离子体处理过的不粘连 O 形圈。现在，您可以快速、轻松地安装新的、干净的衬管，无需寻找 O 形圈包或者因安装时触摸衬管而造成污染。

观看无接触包装的演示视频：

www.agilent.com/chem/touchless

经验证的性能

每个脱活批次都经过痕量水平 (2 ng 柱上量) 的酸性和碱性探针验证以确保产品的性能和一致性。此外，每根衬管都附带一份性能合格证明，您可将其贴在实验记录本中以便进行快速合规参考。

性能合格证明 Agilent

5190-2293 超高惰性衬管
不分流，单锥形，带玻璃毛


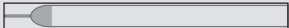

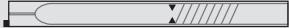
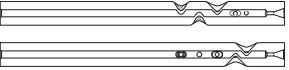

衬管批次号：**0023A**
脱活批次号：**B11002**

检测样品：**2 ng 4-联苯胺**
2 ng 2,4-二硝基酚



易于追踪：
脱活批次号直接印在性能合格证明上，衬管批次号和部件号永久刻在玻璃表面

超高惰性衬管订购表

描述	部件号
不分流，单锥形，无玻璃毛 	5190-2292 (单个包装)
	5190-3162 (5/包)
	5190-3166 (25/包)
	5190-3170 (100/包) *
不分流，单锥形，带玻璃毛 	5190-2293 (单个包装)
	5190-3163 (5/包)
	5190-3167 (25/包)
	5190-3171 (100/包) *
分流，直型，带玻璃毛 	5190-2294 (单个包装)
	5190-3164 (5/包)
	5190-3168 (25/包)
	5190-3172 (100/包) *
通用，低压降，带玻璃毛 	5190-2295 (单个包装)
	5190-3165 (5/包)
	5190-3169 (25/包)
	5190-3173 (100/包) *
不分流，带 2 mm 浅凹坑 	5190-2297 (单个包装)
	5190-4006 (5/包)
不分流，双锥形，无玻璃毛 	5190-3983 (单个包装)
	5190-4007 (5/包)

*无接触包装不适用于 100 个的大包装

了解有关安捷伦超高惰性解决方案，包括安捷伦 J&W 超高惰性气相色谱柱系列产品的更多信息，请访问 www.agilent.com/chem/Ultralnert:cn

索取免费的安捷伦超高惰性海报或产品宣传册，请访问 www.agilent.com/chem/Ulorder:cn

或者联系您当地的安捷伦客服中心或安捷伦授权经销商 www.agilent.com.chem/wheretobuy:cn

本资料中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2011
2011年12月22日, 中国印刷
5990-7564CHCN