

让喧闹的前级泵 从此安静下来

The Measure of Confidence



可用于 GC/MS、ICP-MS 和 LC/MS 系统的安捷伦静音罩

一旦前级泵开始运行，整个实验室就会回荡着恼人的噪音。高质量安捷伦静音罩能够使噪音离您远去。安捷伦静音罩具有以下几点优势：

- **对噪音进行有效的控制：**机柜填充有隔音的泡沫隔层，可有效降低泵的噪声，同时，安装在减震锁环的泵可使振动降到最低
- **降低过热风险：**组合风扇可保持罩内温度相对恒定，在温度超过 35 °C 时，会自动发出警报
- **便于泵的维护：**内置支架、防污滴盘以及便于升高和倾斜的支架简化了泵油的更换和其它常规维护工作。此外，静音罩设有多个窗门，您可无需借助工具便快速打开窗门进行泵的维护
- **放心操作：**每台静音罩都享有安捷伦标准的一年质保。若订购新的仪器，安捷伦将为您提供系统安装和操作培训。

G6011A 质谱静音罩




震动最小

易于维护泵

配有支架

集油盘可拆除

G6012A DS 静音罩

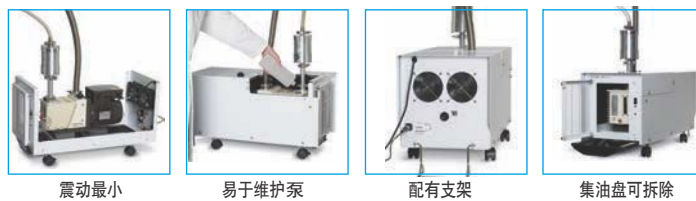

震动最小

易于维护泵

配有支架

集油盘可拆除

G6014A GC/MS 静音罩



带底槽的浮油 / 滴盘

开放式静音罩

便于升高和倾斜的支架

LED 内灯

怎样才算安静？ 请自行对比：

- 空调噪音：60 分贝
- 无质谱静音罩的前级泵：58 分贝
- 带质谱静音罩的前级泵：仅有 50 分贝



使用您的智能手机
扫描二维码，
然后点击收听。



为您的实验室带来渴求已久的宁静。

立即订购，请访问
agilent.com/chem/quietcover



Agilent Technologies

根据下表判断哪种静音罩更适用于您的系统

部件号	与以下安捷伦系统兼容	泵型号
G6011A 质谱静音罩	325-MS QQQ LC/MS 500 离子阱 LC/MS 6100 系列 SQ LC/MS	6420 QQQ LC/MS 6490 QQQ LC/MS (x2 MS40+ 泵)
G6012A DS 静音罩	7700 ICP-MS 7200 GC-QTOF	Agilent DS202 Agilent DS302
G3199B 静音罩 2.0	8800 ICP-QQQ 6530 Q-TOF LC/MS 6540 Q-TOF LC/MS	6230 TOF LC/MS 6430 QQQ LC/MS 6460 QQQ LC/MS
G6014A GC/MS 静音罩	5977 GC/MS 5975 GC/MS 5973 GC/MS	Pfeiffer Duo 2.5 Edwards E2M1.5
		Agilent MS40+ Agilent DS402 Agilent DS602 BOC Edwards E2M28 BOC Edwards E2M18 BOC Edwards E1M18 Agilent DS42 Agilent DS42i

如需立即订购并查看最新的兼容产品表，请访问
agilent.com/chem/quietcover

要获知当地安捷伦客户服务中心或安捷伦授权的代理商，请访问 www.agilent.com/chem/contactus
订购前，请确认您的安捷伦系统使用了前级泵。

安捷伦的色谱柱和备件：为您提供分析质量控制和充足的信心



不论采用哪种色谱仪器，如 GC、LC、GC/MS 还是 LC/MS；或无论进行何种分析，安捷伦都能够提供从样品前处理到生成结果报告的端对端解决方案。所有备件都经过了严格的制造、选择和测试过程。

您也可以查阅安捷伦丰富的应用简报资料库来加快方法的开发，另外我们还有覆盖全球的技术

支持、快速问题解决通道，以及遍布全球的分支机构和配送网络。

安捷伦严谨的生产监督保证了色谱柱和备件性能的一致性。我们拥有 70 多年仪器、聚合物和硅胶固定相的生产经验，我们整个团队始终致力于开发最新的产品，最大程度地提高分析效率。

立即采购，请访问 agilent.com/chem/store

本资料中的信息如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2013
中国印刷 2013 年 4 月 23 日
5990-9341CHCN

The Measure of Confidence



Agilent Technologies