

# CrossLab セルフタイトカラムナット

The Measure of Confidence

CrossLab セルフタイトカラムナット (他社 GC、GC/MS 用) が発売になりました。

CrossLab セルフタイトカラムナットは、アジレント GC、GC/MS 用セルフタイトカラムナットと同様、カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、85 % ポリイミド / 15 % グラファイトショートフェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。


**信頼性の高い接続：**カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。

**時間のロスを回避：**オープン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。

**使いやすさ：**指で締められるため、スパナなどの工具が必要ありません。どなたでも一貫性の高い確実なカラム接続が可能です。

**迅速なメンテナンス：**低トルクのため、取り外しの際のフェラルの貼りつきや割れを防止します。

**低カラムブリード：**リークを防止することで、カラム寿命を延ばします。

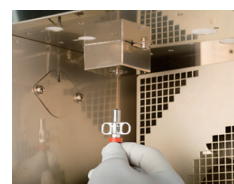

メーカー毎に刻印があります。  
※写真はサーモ用

部品番号	品名	ナット接続口形状	価格
<b>島津製作所用</b>			
8001-0015	セルフタイトカラムナットキット、 <b>島津用</b> ナット、MS ナット各 1 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付 ※注入口と MS インターフェースの接続口形状が異なる時のみご利用ください。	A と B	¥27,000
8001-0016	セルフタイトカラムナットキット、 <b>島津用</b> ナット× 2 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付	 B	¥26,000
8001-0017	セルフタイトカラムナットキット、 <b>島津用</b> ナット× 2 個、内径 0.32 mm カラム用フェラル 10 個付	B	¥26,000
8001-0018	セルフタイトカラムナットキット、 <b>島津用</b> ナット× 2 個、内径 0.53 mm カラム用フェラル 10 個付	B	¥26,000
8001-0020	セルフタイトカラムナットキット、 <b>島津用</b> MS ナット× 2 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付	 A	¥26,000
<b>サーモサイエンティフィック用</b> ※サーモ Trace1300/1310 でご利用になる場合はご相談ください。			
8002-0009	セルフタイトカラムナットキット、 <b>サーモ用</b> 、ナット 2 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付		¥26,000
8002-0010	セルフタイトカラムナットキット、 <b>サーモ GC/MS 用</b> ※ ナット、MS ナット各 1 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付 ※セルフタイトカラムナットのサーモ GC/MS ISQ 用です。GC 注入口用と MS インターフェース用で、ナットの形状が異なります。		¥26,000
8002-0011	セルフタイトカラムナットキット、 <b>サーモ用</b> 、ナット 2 個、内径 0.32 mm カラム用フェラル 10 個付		¥26,000
8002-0012	セルフタイトカラムナットキット、 <b>サーモ用</b> 、ナット 2 個、内径 0.53 mm カラム用フェラル 10 個付		¥26,000
<b>パーキンエルマー用</b>			
8003-0010	セルフタイトカラムナットキット、 <b>パーキン用</b> 、ナット 2 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付		¥26,000
8003-0011	セルフタイトカラムナットキット、 <b>パーキン用</b> 、ナット 2 個、内径 0.32 mm カラム用フェラル 10 個付		¥26,000
8003-0012	セルフタイトカラムナットキット、 <b>パーキン用</b> 、ナット 2 個、内径 0.53 mm カラム用フェラル 10 個付		¥26,000
<b>ブルカー用</b>			
8004-0009	セルフタイトカラムナットキット、 <b>ブルカー用</b> 、ナット 2 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付		¥25,000
8004-0010	セルフタイトカラムナットキット、 <b>ブルカー用</b> 、ナット 2 個、内径 0.32 mm カラム用フェラル 10 個付		¥25,000
8004-0011	セルフタイトカラムナットキット、 <b>ブルカー用</b> 、ナット 2 個、内径 0.53 mm カラム用フェラル 10 個付		¥25,000

# ARE YOU MAKING ALL THE RIGHT CONNECTIONS?



## Agilent セルフタイトカラムナット

### 工具のいらない GC カラム接続 簡単・確実に接続できる手締めナット

#### 信頼性の高い接続：

カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。

#### 時間のロスを回避：

オープン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。

#### 使いやすさ：


指で締められるため、スパナなどの工具が必要ありません。どなたでも一貫性の高い確実なカラム接続が可能です。

#### 迅速なメンテナンス：

低トルクのため、取り外しの際のフェラルの貼りつきや割れを防止します。


#### 低カラムブリード：

リークを防止することで、カラム寿命を延ばします。

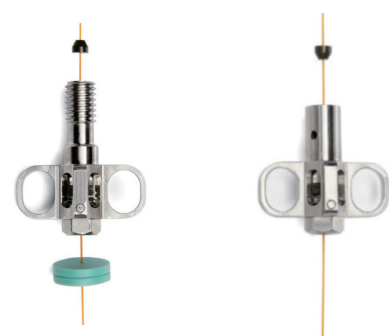

5190-6194  
注入口  
および検出器用

5190-5233  
MS トランスファー  
ライン用

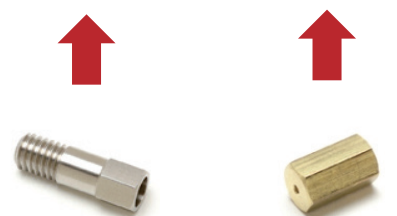

※両方とも 85% ポリイミド / 15% グラファイト  
ショートフェラルを使用します。

部品番号	品名	価格
5190-6194	セルフタイトカラムナット、GC注入口、検出器用	¥9,400
5190-5233	セルフタイトカラムナット、MSトランスファーライン用	¥10,000
5181-3323	フェラル、0.4 mm、ポリイミド/グラファイトショート、内径0.25 mmカラム用、10個	¥7,800
5062-3514	フェラル、0.5 mm、ポリイミド/グラファイトショート、内径0.32 mmカラム用、10個	¥7,300
5062-3512	フェラル、0.8 mm、ポリイミド/グラファイトショート、内径0.53 mmカラム用、10個	¥7,400

アジレント・テクノロジー株式会社

本社/〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  
●カスタムコンタクトセンター ☎0120-477-111  
email\_japan@agilent.com

※仕様は予告なく変更する場合があります。

[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

Copyright © 2016 Agilent Technologies  
Printed in Japan. Apr. 1, 2016  
5991-5518JAJP



Agilent Technologies