



DREAM BIGGER

Sistema GC Agilent Intuvo 9000

Innovazione mirata

L'innovazione che lascia il segno è molto di più di un'idea brillante trasformata in realtà: deve far sì che gli utilizzatori siano capaci di cambiare il loro mondo.

Intelligente. Intuitivo. Innovativo. Intuvo.

I moderni laboratori di gascromatografia devono continuamente misurarsi con l'esigenza di trovare soluzioni pratiche a problemi reali. Trattare matrici complesse, salvaguardare l'integrità di dati critici e rispondere alle esigenze di formazione degli utilizzatori sono aspetti che possono tradursi in investimenti ingenti in termini di tempo e risorse.

Intuvo dà prova del suo valore offrendo una prospettiva inedita e un insieme di approcci sinora non disponibili per superare questi e altri problemi.



Al servizio dei laboratori di analisi in tutto il mondo

Da oltre 50 anni Agilent è all'avanguardia delle tecniche e tecnologie che hanno plasmato le moderne applicazioni di gascromatografia. Ancora oggi Agilent continua a far avanzare i confini delle tecniche GC.

Per maggiori informazioni,
visita il sito
www.agilent.com/chem/intuvo

SISTEMA GC AGILENT INTUVO 9000 CON SPETTROMETRO DI MASSA AGILENT 7010 A TRIPLO QUADRUPOLO

IL PARTNER IDEALE PER LA SPETTROMETRIA DI MASSA

Spostando gli attuali limiti operativi, Intuvo promuove una nuova concezione dei flussi di lavoro, dell'efficienza e dei risultati. Integra Intuvo nel tuo laboratorio e trasforma i sogni in realtà.

Prestazioni ottimali

Ottenute con qualsiasi rivelatore GC o spettrometro di massa a singolo/triplo quadrupolo.

Produttività

Intuvo è complementare a tutti i sistemi di introduzione del campione GC di Agilent.

Intuitivo

L'interfaccia utente touch-screen visualizza informazioni chiave sullo stato degli strumenti.

Controllo software avanzato


Acquisire familiarità con un sistema Intuvo significa acquisire familiarità con il software Agilent che già conosci: OpenLAB CDS e MassHunter. Non è necessaria alcuna formazione mirata.

Servizi di assistenza

La funzionalità Remote Advisor del sistema Intuvo fornisce dati e informazioni (tramite il report sullo stato) su configurazione degli strumenti, numero di iniezioni in colonna, cronologia degli errori e altri parametri critici delle prestazioni che agevolano l'ottimizzazione dell'efficacia delle apparecchiature e della produttività.



Grazie all'innovativa linea di prodotti di consumo e raccordi, il sistema Intuvo è il gascromatografo premium più efficiente e più conveniente da possedere e utilizzare. La linea di prodotti di consumo appositamente sviluppati include: raccordi senza ferrule, Retention Gap a tecnologia Guard Chip e colonne da non accorciare che mutano radicalmente la natura delle applicazioni GC.

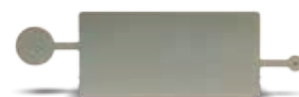

Grazie alla rapidità di sostituzione dei Guard Chip, le delicate operazioni di manutenzione della colonna e il conseguente fermo macchina sono ormai un ricordo del passato.



I Flow-Chip Intuvo sono dotati di chiavi SmartID per l'auto-configurazione, il monitoraggio dell'uso e lo sviluppo automatico di metodi.




Le guarnizioni Intuvo sostituiscono le ferrule tradizionali, garantendo tenute a prova di perdite tra i componenti del percorso di flusso inerte Intuvo.



Le colonne Intuvo, rivestite con fasi stazionarie collaudate nel settore e dal formato estremamente innovativo, includono chiavi SmartID per l'identificazione immediata e il monitoraggio dell'uso.

Il riscaldamento diretto della colonna fa risparmiare tempo e migliora la produttività dimezzando al tempo stesso l'ingombro di un forno convenzionale.

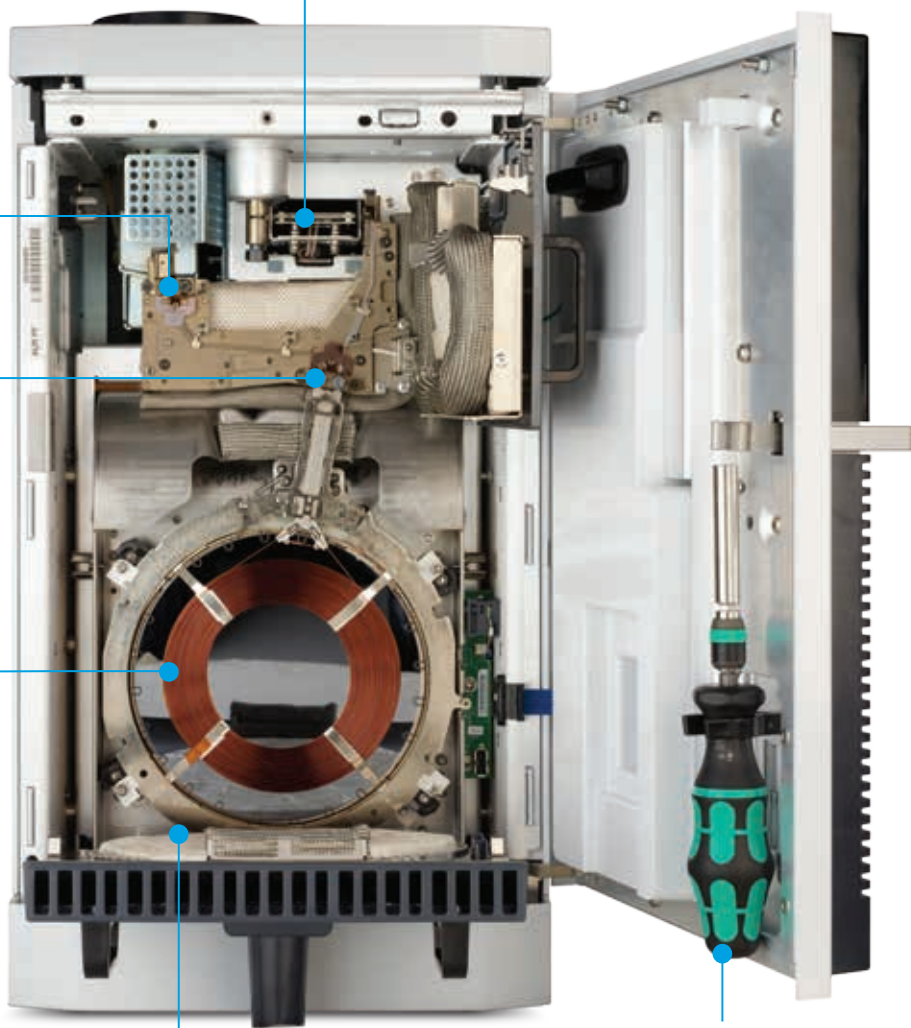

Il cacciavite dinamometrico facilmente reperibile permette di eseguire rapidamente connessioni click-and-run a prova di perdite oltre che l'installazione della colonna.



La nostra competenza al tuo servizio

Agilent CrossLab offre una suite completa di servizi, inclusi i servizi Agilent CrossLab Transition, oltre ad Agilent University per ottimizzare la produttività e proteggere il tuo investimento.



Controllo software avanzato

Acquisire familiarità con un sistema Intuvo significa acquisire familiarità con il software Agilent che già conosci: OpenLAB CDS e MassHunter. Non è necessaria alcuna formazione mirata.

Maggiori informazioni

www.agilent.com/chem/intuvo

www.agilent.com/chem/intuvocolumns

www.agilent.com/chem/intuvosupplies

Acquista online

www.agilent.com/chem/store

Per trovare un centro assistenza clienti Agilent nel tuo Paese

www.agilent.com/chem/contactus

Italia

numero verde 800 012 575

customercare_italy@agilent.com

Europa

info_agilent@agilent.com

Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2016
Pubblicato negli Stati Uniti, 22 agosto 2016
5991-7313ITE

