


성장하는 실험실을 위한 안전한 데이터 관리

Agilent OpenLab ECM XT

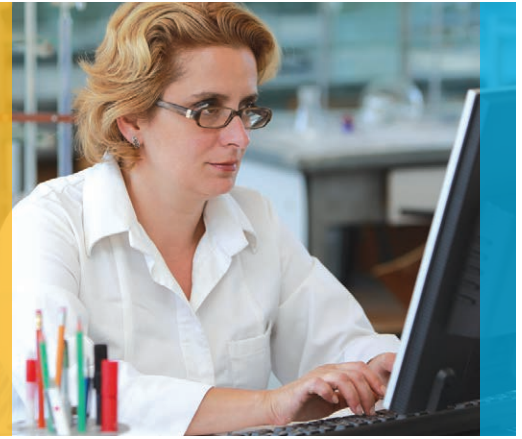

데이터를 보호하기 위한 보다 효율적이고 신뢰성 있는 대안

평판의 영향을 많이 받는 제약 실험실이든 최고의 제품 품질을 추구하는 생산 시설이든 과학적 데이터는 가장 중요한 자산입니다. 귀하의 정보는 승인 없는 조작 및 손실로부터 보호 받고 검사 또는 조사가 필요할 때 쉽게 액세스할 수 있어 걱정하실 필요가 없습니다.

모든 중요한 데이터를 안전하게 보관하고 쉽게 찾을 수 있도록 보장

법규에 규정된 기간 동안 데이터 파일을 보관해야 하는 경우가 많습니다. 콘텐츠 가져오기 도구가 있으면 모든 중요한 기기 데이터를 적절한 시기에 자동으로 보호할 수 있습니다. 유연한 검색 기능으로 데이터를 쉽게 찾을 수 있습니다.

조작 방지 및 승인 없는 변경이나 삭제 확인

OpenLab ECM XT를 사용하면 암호로 보호된 액세스로 안전한 위치에 데이터와 파일을 저장할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 또한 모든 버전의 전자 기록과 데이터를 추적하고 저장합니다. 따라서 이전 버전의 전자 기록과 데이터를 복구하고 변경 사항을 검토할 수 있습니다.

종이 보고서 및 기록을 관리하는 시간과 비용 절감

종이 보고서 및 기록을 수년간 저장하려면 많은 저장 공간(현장 또는 비현장)과 비용이 필요합니다. OpenLab ECM XT는 자동화된 콘텐츠 가져오기 기능을 통해 파일링과 정리 과정을 간소화할 수 있습니다.

최소한의 적격성 평가 비용으로 신속하게 구현

OpenLab ECM XT는 웹 기반 소프트웨어로써 데이터에 액세스하는 모든 PC에 소프트웨어를 설치해야 하는 다른 실험실 데이터 관리 시스템과 달리 서버에만 설치하면 됩니다. 또한 OpenLab ECM XT는 OpenLab CDS 클라이언트/서버를 실행 중인 실험실에 쉽게 설치할 수 있습니다.

소규모 및 대규모 실험실의 확장 계획 지원

귀하의 실험실 확장 계획을 지원할 수 있도록 애질런트는 지속적으로 확장 과정을 간소화하고 작업 범위를 늘릴 수 있는 기능을 추가합니다. 빠르게 성장하는 조직을 지원하는 구성과 클라우드 기반의 보관 같은 혁신에 대해 궁금하시다면 담당자에게 문의하십시오.

Agilent
OpenLab



데이터의 집중화 관리가 실험실에 주는 혜택:

- 보관 비용과 용지 사용량 절감
- 데이터 자동 보호
- 쉬운 정보 검색 및 열람

애질런트 담당자에게 문의하거나
www.agilent.com/chem/openlabecmxt를 방문하십시오.

OpenLab ECM XT를 통해 콘텐츠 관리 문제 해결

문제점

OpenLab ECM XT의 해결 방법:

"저희가 보유한 데이터 파일, 전자 기록 및 기타 문서는 가끔 부적절하게 편집됩니다."

- 승인된 인원만 액세스 가능
- 모든 파일 업데이트의 시간, 날짜 및 담당자를 기록하고 검토
- 특정 애질런트 데이터 시스템에서 모든 버전의 파일, 전자 기록 또는 데이터를 복구하고 검토

"저희는 종이 기록을 파일링하는 데 너무 많은 시간, 공간 및 비용을 낭비합니다."

- 전자 버전 문서를 저장 및 정리
- 모든 보고서를 올바른 위치에 저장하도록 보장
- 종이 보고서 저장 공간을 생산적 공간으로 전환

"새로운 기술을 적용하려면 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 또한 전환 과정에서 생산성이 저하됩니다."

- 배포 장벽 제거:
 - 클라이언트 배포 불필요
 - 현재 OpenLab CDS 클라이언트/서버를 실행 중이라면 OpenLab ECM XT 설치에 데이터 마이그레이션이 필요 없는 "인플레이스" 업그레이드입니다.
 - 원하는 데이터베이스를 사용할 수 있는 유연성
- 비용 최소화: OpenLab ECM XT는 경쟁 소프트웨어 패키지보다 작은 풋프린트를 가집니다.

"특히 불편한 장소로 이동했을 때 정보를 찾고 검토하는 일은 번거롭습니다."

- 키워드 검색 필드를 통해 원본 데이터, 분석법, 보고서를 찾을 수 있어 임의의 장소에서 데이터와 파일을 쉽게 검색 및 검토 가능
- 네트워크에 연결된 임의의 PC에서 특정 애질런트 CDS 데이터 검토

"파일을 마지막으로 사용한 상태 그대로 영구 저장하기 위해 어떤 방법을 이용하십니까?"

- 데이터와 파일을 적절한 시기에 자동으로 저장
- 추가 수정을 방지하기 위해 데이터와 파일 잠금

"현지어가 아닌 언어를 사용하여 데이터와 파일을 관리하려면 오류가 자주 발생하고 교육이 필요합니다."

- 영어, 중국어, 일본어 및 브라질 포르투갈어와 같은 현지 언어로 인터페이스를 탐색하고 파일 관리

중요 데이터의 보호, 저장 및 액세스에 대한 자세한 내용은 애질런트 담당자에게 문의하시거나 www.agilent.com/chem/openlabecmxt를 방문하십시오.

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc., 2019
2019년 7월 17일, 한국에서 발행
5991-8644KO

한국애질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화 : 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스 : 82-2-3452-2451
이메일 : korea-inquiry_lsca@agilent.com