



火焰 AAS 热门推荐备件

N₂O 燃烧头

- 高温一氧化二氮燃烧头确保 Al、Si、Mo、V 和 Ti 等难熔元素的高效原子化
- 燃烧头清洁条可确保燃烧头的正确清洁和校准，从而实现超高精度和长期稳定运行

210164100 燃烧头，一氧化二氮-乙炔，Mark 7，1/包

9910053900 燃烧头清洁 + 校准卡，100/包

Mark 7 雾化室组件


- O 形圈工具包是确保常备雾化室中使用的所 O 形圈的简便方法
- 如果 O 形圈损坏、过度磨损或有划痕/裂纹/切口，则应将其更换

9910093400 Mark 7 雾化室 O 形圈工具包，水相

空心阴极灯

从提供的产品系列中选择单元素或多元素编码或非编码灯。

[访问此链接](#)并选择元素所需元素灯。

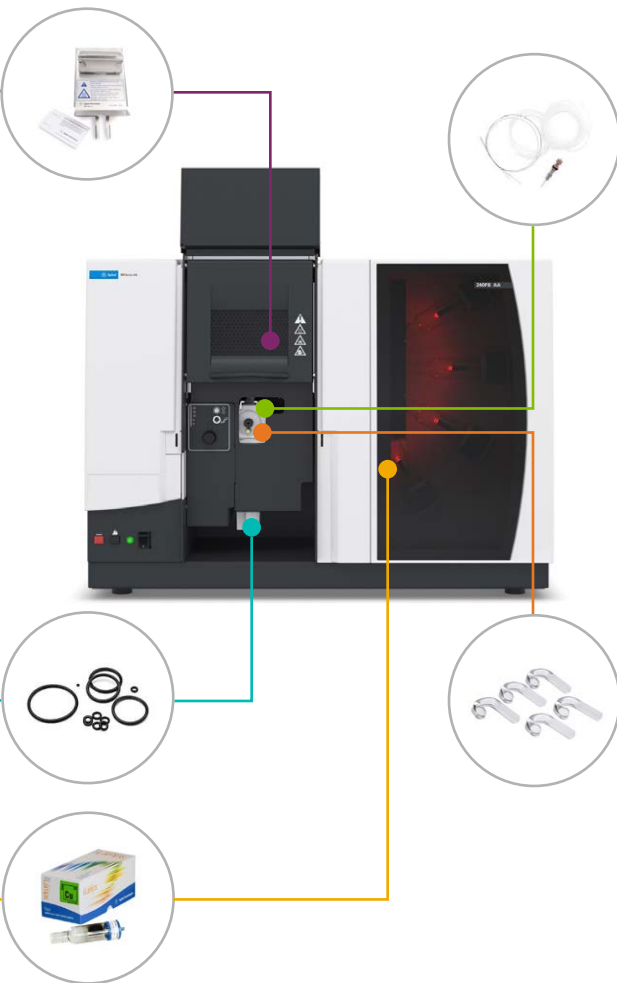

Mark 7 雾化器组件

- 集成雾化器包括可轻松互换的毛细管组件，可降低维护成本
- 磨损组件可轻松更换，确保超高灵敏度和精度，并减少堵塞
- 带扩口端的高真空毛细管线确保对大多数样品类型都有出色灵敏度

9910093000 雾化器毛细管工具包，Mark 7 雾化室，1/包

9910044000 毛细管管线，高真空雾化器，3/包

玻璃撞击球

- 外部可调节玻璃珠会破坏样品流，确保更小颗粒的气溶胶，提供更好的性能
- 通过快速调节球的位置调整灵敏度和精度

9910025700 玻璃撞击球 Mark V/VI/7，5/包



了解基本仪器备件清单中的完整推荐备件



石墨炉 AAS 热门推荐备件

石墨炉工作台


- 安捷伦管由光谱纯石墨加工而成，带致密、坚硬的热解石墨涂层，以提高灵敏度并延长使用寿命
- 这些高纯石墨管每批都经过检测，以确保满足严格的性能指标要求
- 适用于大多数应用，为具有低背景的背景样品提供了出色的检测限
- 也推荐用于有机溶剂，或粘性低、易在石墨管内扩散，并会降低检测精度的样品

6310001200 间隔管，热解涂层，10/包

空心阴极灯

从提供的产品系列中选择单元素或多元素编码或非编码灯。

[访问此链接](#)并选择元素所需元素灯。

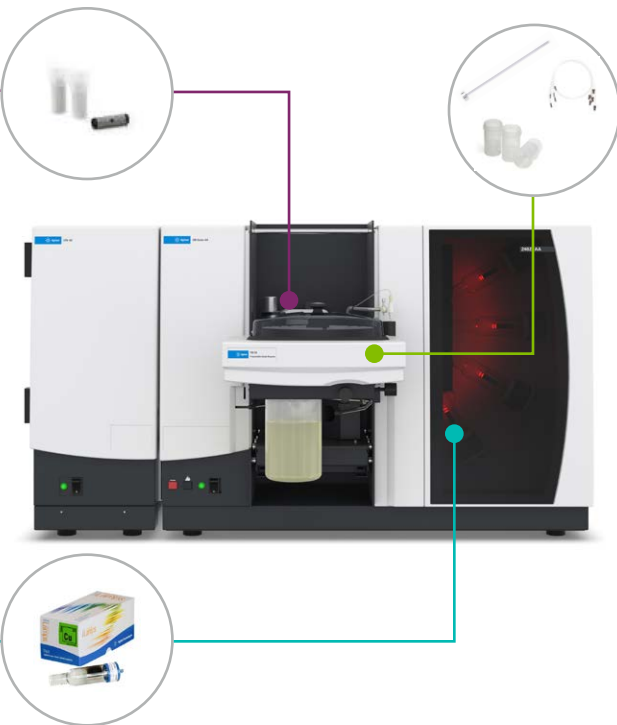

可编程进样器 (PSD) 备件

- 样品毛细管减少污染并确保准确分配到石墨管中
- 定期更换推杆可确保密封良好，以确保准确的样品分配、减少泡沫形成并减少交叉污染
- 安捷伦 2 mL 样品瓶具有圆锥形设计，确保适用于几乎所有样品

9910115100 毛细管组件，5/包。用于 PSD 120 可编程进样器

4710003100 用于 PSD 的 100 μ L 进样针推杆，PTFE 头，1/包

9910028200 样品瓶，2 mL，圆锥形，聚乙烯，用于 PSD，1000/包

