

완전한 차이를 만드는 최적의 GC 연결


새롭게 개선된 Agilent FID/NPD 제트



GC 기기 유지 보수를 단순화하고 싶으십니까?

검출기 제트 교체는 크로마토그래피 손상으로 이어질 수도 있는 까다로운 작업일 수 있습니다. 이제 새로 설계된 검출기 제트로 제품 손상에 대한 걱정 없이 보다 쉽게 설치할 수 있습니다. 다음과 같은 특징을 통해 분석자와 기기 기술자의 작업 부담을 덜어줍니다.

- 편리한 컬럼 설치. 제트 꼬리가 짧아지고 입구가 넓어져 컬럼 연결시 손상 가능성을 없앱니다. 또한 제트 교체를 수행하는 동안 더 이상 컬럼을 다시 설치할 필요가 없습니다. 기존 제트를 빼내고 새 제트를 돌려서 끼워 넣기만 하면 됩니다
- 더욱 간편한 컬럼 전환. 현재 산업용 제트에는 다양한 컬럼 유형에 사용이 가능하도록 여러 부품이 필요합니다. 애질런트의 신형 제트는 충전 컬럼 및 캐필러리 컬럼과 모두 호환됩니다
- 기계적 특성 강화. 향상된 설계가 적용된 애질런트 제트는 크로마토그래피 결과 왜곡을 발생시키는 Neck elongation 및 Thread galling과 같은 설치 손상 걱정이 없습니다
- 완벽한 호환성. Intuvo, 새로운 8890 또는 5890을 실행하는 모든 경우에 이 제트는 모든 애질런트 GC 시스템에서 작동합니다

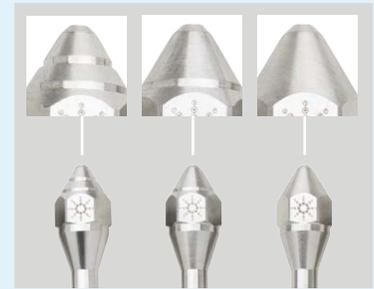

간편한 제트 헤드 식별

각 제트 헤드의 에칭 링으로 오리피스 크기를 쉽고 빠르게 식별할 수 있습니다.

www.agilent.com/chem/gcsupplies-detectors에서 자세한 정보를 확인하세요.

www.agilent.com/chem/contactus에서 현지 애질런트 영업 담당자 또는 애질런트 공인 대리점에 문의하세요.

DE.3408564815

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
2021년 4월 19일, 한국에서 발행
5994-1766KO

한국애질런트테크놀로지스㈜
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com

 **Agilent**
Trusted Answers