


GPC/SEC 色谱柱和标准品选择指南

指导您选择正确的色谱柱和标准品

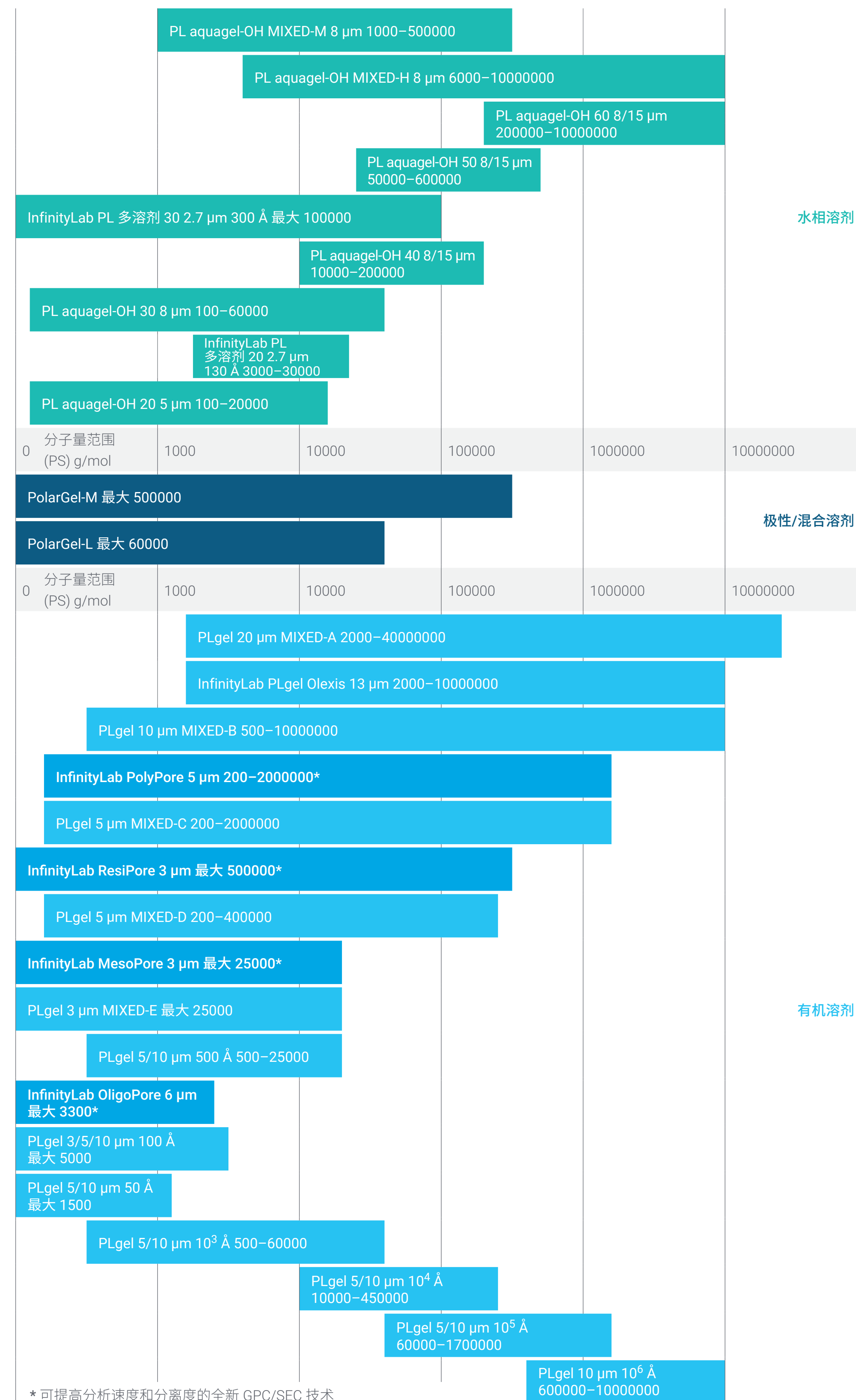

< 选择合适的 GPC 色谱柱

单一孔径色谱柱

PLgel 单一孔径 GPC 色谱柱可在较窄的分子量范围内提供超高分离度。还可叠加色谱柱以扩大分子量范围。对于分子量很小和很大的聚合物，通常推荐使用单一孔径色谱柱。

混合色谱柱

这类色谱柱覆盖的分子量范围广，旨在为分子量测定提供超高的准确度。它们可确保在整个分子量范围内具有相同的分离度，从而消除连接单一孔径色谱柱可能引起的问题。

InfinityLab Pluspore 色谱柱

InfinityLab PlusPore 色谱柱即使在使用 DMF、DMSO 和 NMP 等棘手溶剂时，也能实现出色重现性和超高分离度。高效小颗粒采用多孔技术，大大提高分离度，不影响分子量范围或使用寿命。

选择合适的 GPC 标准品 >

Agilent EasiCal

预配制的刮片组，适用于简单的工作流程

Agilent EasiVial

预配制的样品瓶形式，使用方便，有利于节省时间

